

# Xpert<sup>®</sup> Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*

**REF** XP3COV2/FLU/RSV-10

Istruzioni per l'uso

Per l'uso con il sistema GeneXpert<sup>®</sup> con touchscreen e  
sistema operativo Cepheid



## **Dichiarazioni relative a marchi di fabbrica, brevetti e copyright**

Cepheid®, the Cepheid logo, GeneXpert®, and Xpert® are trademarks of Cepheid, registered in the U.S. and other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

THE PURCHASE OF THIS PRODUCT CONVEYS TO THE BUYER THE NON-TRANSFERABLE RIGHT TO USE IT IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS FOR USE. NO OTHER RIGHTS ARE CONVEYED EXPRESSLY, BY IMPLICATION OR BY ESTOPPEL. FURTHERMORE, NO RIGHTS FOR RESALE ARE CONFERRED WITH THE PURCHASE OF THIS PRODUCT.

© 2022–2025 Cepheid.

Cepheid®, il logo Cepheid, GeneXpert® e Xpert® sono marchi di fabbrica di Cepheid, registrati negli USA e in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

L'ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO CONCEDE ALL'ACQUIRENTE IL DIRITTO NON TRASFERIBILE DI UTILIZZARLO IN ACCORDO ALLE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO. NESSUN ALTRO DIRITTO VIENE CONCESSO ESPRESSAMENTE, IMPLICITAMENTE O PER PRECLUSIONE. INOLTRE, CON L'ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO NON VIENE CONCESSO NESSUN DIRITTO ALLA RIVENDITA.

© 2022–2025 Cepheid.

Consultare la Cronologia delle revisioni per una descrizione delle modifiche.

# Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*

---

## 1 Nome registrato

Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*

## 2 Nome comune o usuale

Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*

## 3 Destinazione d'uso

Il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*, eseguito sul sistema GeneXpert con touchscreen con sistema operativo Cepheid (una configurazione con touchscreen all'interno della famiglia di strumenti GeneXpert), è un test RT-PCR in tempo reale multiplexato destinato all'uso per la rilevazione qualitativa e la differenziazione simultanea *in vitro* dell'RNA di SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e/o virus respiratorio sinciziale (RSV) in campioni di tampone nasofaringeo o nasale anteriore raccolti da individui con segni e/o sintomi di infezione virale respiratoria.

L'RNA di SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e RSV identificato da questo test è generalmente rilevabile nei campioni delle vie respiratorie superiori durante la fase acuta dell'infezione. I risultati positivi sono indicativi della presenza del virus identificato, ma non escludono un'infezione batterica o una coinfezione con altri agenti patogeni non rilevati dal test.

Per determinare lo stato di infezione del paziente è necessaria una correlazione clinica con l'anamnesi e altre informazioni diagnostiche. L'agente individuato può non essere la causa certa della malattia.

I risultati negativi non escludono la possibilità di infezione da SARS-CoV-2, virus dell'influenza A, virus dell'influenza B e/o RSV e non devono pertanto essere usati come unica base per il trattamento o per altre decisioni riguardanti la gestione dei pazienti. I risultati negativi devono essere combinati con le osservazioni cliniche, la storia del paziente e/o le informazioni epidemiologiche.

### 3.1 Utilizzatore/ambiente previsto

Il test Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus* deve essere eseguito in ambienti di laboratorio e vicino al paziente da operatori appositamente formati.

## 4 Riepilogo e spiegazione

Il 31 dicembre 2019 fu inizialmente segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un focolaio epidemico di malattia respiratoria di eziologia ignota originatosi in Cina, nella città di Wuhan, provincia di Hubei. <sup>1</sup> Le autorità cinesi identificarono un nuovo coronavirus (2019-nCoV) che da quel momento in poi si diffuse a livello globale per dare origine alla pandemia della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). La malattia da COVID-19 è associata a varie manifestazioni cliniche, tra cui infezione asintomatica, lieve infezione delle alte vie respiratorie, grave malattia delle basse vie respiratorie comprendente polmonite e insufficienza respiratoria e, in alcuni casi, decesso. Il Comitato internazionale per la tassonomia dei virus (International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV) ha rinominato il virus SARS-CoV-2.<sup>2</sup>

L'influenza è un'infezione virale contagiosa delle vie respiratorie. La trasmissione dell'influenza avviene principalmente tramite goccioline di aerosol (ovvero, tossendo o starnutendo) e prevalentemente durante i mesi invernali. I sintomi generalmente includono febbre, brividi, cefalea, malessere generalizzato, tosse e congestione dei seni nasali. Sebbene siano meno comuni, possono anche essere presenti sintomi gastrointestinali (ovvero nausea, vomito o diarrea), specialmente nei bambini. La comparsa dei sintomi, in genere, avviene entro due giorni dal contatto con una persona infetta. La polmonite può insorgere come complicanza secondaria all'influenza, provocando un aumento della morbilità e della mortalità nelle popolazioni pediatriche, geriatriche e immunocompromesse.<sup>3,4</sup>

I virus dell'influenza sono classificati secondo i tipi A, B e C; tra questi, i primi due sono la causa della maggior parte delle infezioni nell'uomo. Il virus dell'influenza A (Flu A) è il tipo più comune di virus influenzale nell'uomo; è generalmente responsabile delle epidemie influenzali stagionali e può causare pandemie. I virus Flu A possono infettare anche gli animali, ad esempio volatili, suini ed equini. Le infezioni dovute al virus dell'influenza B (Flu B) sono limitate per lo più all'uomo e con minore frequenza provocano epidemie.<sup>5</sup> I virus dell'influenza A si suddividono in sottotipi in base a due proteine di superficie: l'emoagglutinina (H) e la neuraminidasi (N). L'influenza stagionale è normalmente causata dai sottotipi H1, H2, H3, N1 e N2 del virus dell'influenza A.

Il virus respiratorio sinciziale (RSV), appartenente alla famiglia *Pneumoviridae* (prima *Paramyxoviridae*) composta da due ceppi (sottogruppi A e B), è causa di un'altra malattia contagiosa che colpisce prevalentemente i bambini piccoli, gli anziani e soggetti immunocompromessi (ad esempio, pazienti con patologie polmonari croniche o sottoposti a trattamento per condizioni che riducono la resistenza del sistema immunitario).<sup>6</sup> Il virus può causare sia infezioni delle alte vie respiratorie come raffreddori, sia infezioni delle basse vie respiratorie che si manifestano come bronchiolite e polmonite.<sup>6</sup> Entro i due anni di età, la maggior parte dei bambini è soggetta a infezione da RSV; tuttavia, poiché l'immunità sviluppata contro questo virus è debole, bambini e adulti possono essere reinfectati.<sup>6</sup> L'RSV resta la causa principale dei ricoveri tra i bambini piccoli in tutto il mondo.<sup>7</sup> I sintomi compaiono da quattro a sei giorni dopo l'infezione e sono generalmente autolimitanti, con una durata da una a due settimane circa nei bambini piccoli. Negli adulti, l'infezione dura 5 giorni circa e si manifesta con sintomi corrispondenti a quelli del raffreddore, come rinorrea, affaticamento, cefalea e febbre. La stagione dell'RSV è usualmente simile a quella dell'influenza: l'incidenza aumenta a partire dall'autunno e dura fino all'inizio della primavera.<sup>5,6</sup>

I virus da SARS-CoV-2, influenza e RSV possono causare infezioni che si presentano con sintomatologia alquanto simile, il che rende molto difficile la loro differenziazione clinica.<sup>8</sup> Programmi di sorveglianza attiva e precauzioni per la prevenzione delle infezioni sono essenziali per prevenire la trasmissione del SARS-CoV-2, dell'influenza e dell'RSV. L'uso di saggi in grado di fornire risultati rapidi per l'identificazione dei pazienti affetti da questi virus può essere importante ai fini di un controllo efficace, della scelta del trattamento idoneo e della prevenzione di focolai epidemici di vaste proporzioni.

## 5 Principio della procedura

Il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus è un test diagnostico automatizzato *in vitro* per il rilevamento qualitativo e la differenziazione simultanei dell'RNA dei virus SARS-CoV-2, influenza A, influenza B ed RSV utilizzando una PCR a trascrizione inversa (RT-PCR). Il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus viene eseguito su GeneXpert Instrument Systems. I primer e le sonde del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus sono progettati per amplificare e rilevare sequenze uniche in: geni del nucleocapside (N), dell'envelope (E) e della RNA polimerasi RNA dipendente (RdRP) del genoma del virus SARS-CoV-2, matrice (M) dell'influenza A, proteina di base della polimerasi (PB2) dell'influenza A, proteina acida (PA) dell'influenza A, matrice (M) dell'influenza B, proteina non strutturale (NS) dell'influenza B e geni del nucleocapside di RSV A e RSV B.

I GeneXpert Instrument Systems consentono di automatizzare e integrare la preparazione dei campioni, l'estrazione, l'amplificazione degli acidi nucleici e il rilevamento delle sequenze bersaglio in campioni semplici o complessi, utilizzando i saggi di RT-PCR e PCR real time. I sistemi sono costituiti da uno strumento, un touchscreen e un software precaricato per l'esecuzione dei test e la visualizzazione dei risultati. I sistemi richiedono l'uso di cartucce monouso contenenti i reagenti PCR per la RT-PCR, in cui si svolgono i processi di PCR/RT-PCR. Essendo le cartucce isolate ermeticamente nel contenuto, il rischio di contaminazione crociata tra i campioni è ridotto al minimo. Per una descrizione completa dei sistemi, si rimanda al *GeneXpert System with Touchscreen Operator Manual*.

Il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus include i reagenti per il rilevamento dell'RNA dei virus SARS-CoV-2, influenza A, influenza B ed RSV in campioni di analisi da tampone nasofaringeo o tampone nasale anteriore. La cartuccia utilizzata dallo strumento GeneXpert include anche un controllo per il trattamento dei campioni (SPC) e un controllo per la verifica della sonda (PCC). L'SPC è presente per controllare l'adeguato trattamento del campione e per monitorare la presenza di potenziali inibitori nella reazione di RT-PCR. Inoltre, l'SPC assicura che le condizioni della reazione di RT-PCR (temperatura e tempo) siano appropriate per la reazione di amplificazione e che i reagenti della RT-PCR siano operativi. Il PCC verifica la reidratazione dei reagenti e il riempimento della provetta di PCR e conferma che nella cartuccia siano presenti tutti i componenti della reazione, ivi compreso il monitoraggio dell'integrità della sonda e della stabilità del colorante.

Il campione di analisi viene prelevato e inserito in una provetta di trasporto contenente 3 ml di mezzo di trasporto virale, 3 ml di soluzione fisiologica o 2 ml di eNAT™. Il campione di analisi viene brevemente miscelato capovolgendo per 5 volte la provetta di raccolta. Utilizzando la pipetta di trasferimento fornita in dotazione, il campione viene trasferito nella camera del campione della cartuccia Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. La cartuccia GeneXpert viene caricata sulla piattaforma del sistema di strumentazione GeneXpert, il quale esegue il trattamento automatizzato, senza intervento manuale, e la RT-PCR real time per il rilevamento dell'RNA virale.

## 6 Reagenti e strumenti

### 6.1 Materiali in dotazione

Il kit Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus* contiene reagenti sufficienti per il trattamento di 10 campioni di analisi o campioni di controllo qualità. Il contenuto del kit è il seguente:

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cartucce Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV <i>plus</i> con provette di reazione integrate</b>                                                                                                                                                 | <b>10</b>                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsfera 1, microsfera 2 e microsfera 3 (liofilizzate)</li> <li>• Reagente di lisi</li> <li>• Reagente legante</li> <li>• Reagente di eluizione</li> <li>• Reagente di lavaggio</li> </ul>     | 1 di ciascuna per cartuccia<br>1,0 ml per cartuccia<br>1,0 ml per cartuccia<br>3,0 ml per cartuccia<br>0,4 ml per cartuccia |
| <b>Pipette di trasferimento monouso</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>10-12 per kit</b>                                                                                                        |
| <b>Volantino</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 per kit</b>                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istruzioni per individuare (e importare) l'ADF e la documentazione, come, ad esempio, il foglietto illustrativo del prodotto su <a href="http://www.cepheid.com">www.cepheid.com</a>.</li> </ul> |                                                                                                                             |
| <b>Istruzioni di riferimento rapido</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 per kit</b>                                                                                                            |
| (solo per gli utenti del GeneXpert Xpress System)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |

**Nota** Le schede dati di sicurezza (SDS) sono disponibili nel sito [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com) nella scheda **SUPPORT** (SUPPORTO).

**Nota** Lo stabilizzatore proteico di origine bovina presente nelle microsfere di questo prodotto è stato realizzato e fabbricato esclusivamente con plasma bovino di origine statunitense. Gli animali non sono stati nutriti con proteine di ruminanti o altre proteine animali e hanno superato i test ante e post mortem. Durante la lavorazione, il materiale non è stato miscelato con altro materiale animale.

## 7 Conservazione e manipolazione del

- Conservare le cartucce Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus* a una temperatura compresa tra 2 e 28 °C.
- Aprire il coperchio della cartuccia solo immediatamente prima di eseguire il test.
- Non utilizzare una cartuccia bagnata o che presenti perdite.

## 8 Materiali necessari ma non forniti

- Tampone floccato in nylon (Copan P/N 502CS01, 503CS01) o equivalente
- Mezzo di trasporto virale, 3 ml (Copan P/N 330C) o equivalente
- Soluzione fisiologica 0,85-0,9% (p/v), 3 ml
- Nasopharyngeal Sample Collection Kit for Viruses (Cepheid P/N SWAB/B-100, Copan P/N 305C) o equivalente
- Nasal Sample Collection Kit for Viruses (Cepheid P/N SWAB/F-100, Copan P/N 346C) o equivalente
- Strumento GeneXpert, touchscreen con lettore di codici a barre integrato, manuale dell'operatore.
- Cepheid OS

## 9 Materiali disponibili non in dotazione

Controlli esterni sotto forma di virus inattivati sono disponibili presso ZeptoMetrix (Buffalo, NY).

- Controllo positivo esterno: N. di catalogo NATFRC-6C (NATrol Flu/RSV/SARS-CoV-2)
- Controllo negativo esterno: N. di catalogo NATCV9-6C (NATrol Coxsackievirus A9)

Terreno di raccolta molecolare e conservazione eNAT di Copan Italy S.p.A. (Brescia):

- Terreno di raccolta molecolare e conservazione eNAT, n. di catalogo Copan 6U073S01
- Terreno di raccolta molecolare e conservazione eNAT, n. di catalogo Copan 6U074S01

## 10 Avvertenze e precauzioni

### 10.1 Avvertenze di carattere generale

- Per uso diagnostico *in vitro*.
- I risultati positivi indicano la presenza dell'RNA di Flu A, Flu B, RSV o SARS-CoV-2.
- Tutti i campioni biologici di analisi, comprese le cartucce usate, devono essere trattati come potenziali veicoli di agenti infettivi. Poiché, nella maggior parte dei casi, è impossibile distinguere i potenziali veicoli di infezione, tutti i campioni biologici di analisi devono essere manipolati utilizzando le precauzioni standard. Le linee guida per il trattamento dei campioni di analisi sono disponibili presso i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Stati Uniti (U.S. Centers for Disease Control and Prevention)<sup>9</sup> e l'Istituto per gli standard clinici e di laboratorio (Clinical and Laboratory Standards Institute).<sup>10</sup>
- Durante il trattamento di sostanze chimiche e la manipolazione di campioni biologici di analisi, rispettare le procedure di sicurezza previste dalla struttura sanitaria di pertinenza.
- Per le informazioni sulla sicurezza e sulla manipolazione, fare riferimento al package insert di Copan eNAT®.
- Evitare il contatto diretto tra tiocianato di guanidina e ipoclorito di sodio (candeggina) o altri reagenti altamente reattivi come acidi e basi. Queste miscele possono emettere gas nocivi.
- I campioni biologici di analisi, i dispositivi di trasferimento e le cartucce usate devono essere trattati come potenziali veicoli di agenti infettivi adottando le precauzioni standard. Attenersi alle procedure di smaltimento dei rifiuti ambientali del proprio istituto per il corretto smaltimento delle cartucce usate e dei reagenti non utilizzati. Questi materiali potrebbero essere considerati rifiuti chimici pericolosi richiedenti uno specifico smaltimento. Se i regolamenti nazionali o regionali non forniscono istruzioni chiare sul corretto smaltimento, i campioni biologici di analisi e le cartucce usate devono essere smaltiti in base alle linee guida dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sulla manipolazione e lo smaltimento dei rifiuti medici.

### 10.2 Campioni di analisi

- Durante il trasporto dei campioni di analisi, mantenere le condizioni di conservazione corrette per garantire l'integrità dei campioni stessi (vedere la Prelievo, trasporto e conservazione dei campioni di analisi). La stabilità dei campioni di analisi in condizioni di spedizione diverse da quelle consigliate non è stata valutata.

### 10.3 Saggio/Reagente

- Non aprire il coperchio della cartuccia Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus tranne che per aggiungere il campione di analisi.
- Non utilizzare una cartuccia che sia caduta dopo essere stata estratta dalla confezione.
- Non agitare la cartuccia. Se la cartuccia cade o viene agitata dopo l'apertura del coperchio, si potrebbero ottenere risultati indeterminati.
- Non applicare l'etichetta con l'ID del campione sul coperchio o sull'etichetta del codice a barre della cartuccia.
- Non utilizzare una cartuccia che presenta l'etichetta del codice a barre danneggiata.
- Non utilizzare una cartuccia la cui provetta di reazione è danneggiata.
- Non utilizzare i reagenti oltre la data di scadenza.
- Ciascuna cartuccia Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus monouso serve per l'esecuzione di un singolo test. Non riutilizzare le cartucce usate.
- Ogni pipetta monouso viene utilizzata per trasferire un solo campione di analisi. Non riutilizzare le pipette monouso.

- Non usare la cartuccia se appare umida o se sembra che il sigillo del coperchio sia stato rotto.
- Indossare camice da laboratorio e guanti puliti. Cambiare i guanti tra una manipolazione e l'altra di ciascun campione di analisi.
- In caso di fuoriuscita di campioni di analisi o di controlli, indossare dei guanti e assorbire la fuoriuscita con salviette di carta. Pulire, quindi, accuratamente l'area contaminata con una soluzione di candeggina per uso domestico al 10% appena preparata. Prevedere un tempo di contatto minimo di due minuti. Accertarsi che l'area di lavoro sia asciutta prima di utilizzare l'etanolo denaturato al 70% per rimuovere i residui di candeggina. Lasciare asciugare completamente la superficie prima di proseguire. Oppure, seguire le prassi standard del proprio istituto previste in caso di contaminazione o fuoriuscita. Per le apparecchiature, seguire le raccomandazioni del produttore per la decontaminazione dell'apparecchiatura.

## 11 Pericoli chimici<sup>11, 12</sup>

- **Avvertenza: Attenzione**
- **Indicazioni di pericolo UN GHS**
  - Nocivo se ingerito
  - Può essere nocivo per contatto con la pelle
  - Provoca irritazione oculare
- **Dichiarazioni precauzionali UN GHS**
  - **Prevenzione**
    - Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione.
  - **Risposta**
    - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
    - In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.
    - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
    - Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

## 12 Prelievo, trasporto e conservazione dei campioni di analisi

La correttezza di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni di analisi è essenziale ai fini delle prestazioni della presente analisi. Il prelievo inadeguato dei campioni di analisi, la loro manipolazione impropria e/o il loro trasporto non corretto possono generare falsi risultati. Vedere Sezione 12.1 per la procedura di prelievo con tampone nasofaringeo e Sezione 12.2 per la procedura di prelievo con tampone nasale anteriore. I campioni di analisi da tampone nasofaringeo e tampone nasale anteriore possono essere conservati a temperatura ambiente (15-30 °C) per un massimo di 48 ore in mezzo di trasporto virale, soluzione fisiologica o eNAT fino all'esecuzione del test sui GeneXpert Instrument Systems. In alternativa, i campioni di analisi da tampone nasofaringeo e tampone nasale anteriore possono essere conservati in frigorifero (2-8 °C) per un massimo di sette giorni, in mezzo di trasporto virale o soluzione fisiologica, e per un massimo di sei giorni in eNAT, fino all'esecuzione del test sui GeneXpert Instrument Systems.

I campioni raccolti nella soluzione fisiologica non devono essere congelati. Consultare il documento "WHO Laboratory Biosafety Guidance Related to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)".

[https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-\(covid-19\)](https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19))

## 12.1 Procedura di prelievo con tampone nasofaringeo

1. Inserire il tampone in una delle narici, infilandolo nel nasofaringe posteriore (vedere la Figura 1).




**Figura 1. Prelievo con tampone nasofaringeo**

2. Ruotare il tampone strofinando con decisione contro il nasofaringe per diverse volte.
3. Estrarre il tampone e collocarlo nella provetta contenente 3 ml di mezzo di trasporto virale, 3 ml di soluzione fisiologica o 2 ml di eNAT.
4. Spezzare il tampone sulla linea indicata eappare bene la provetta di raccolta del campione di analisi.


## 12.2 Procedura di prelievo con tampone nasale

1. Inserire un tampone nasale per circa 1-1,5 cm in una narice. Far ruotare il tampone contro la superficie interna della narice per 3 secondi, premendo un dito sulla sua superficie esterna (vedere la Figura 2).

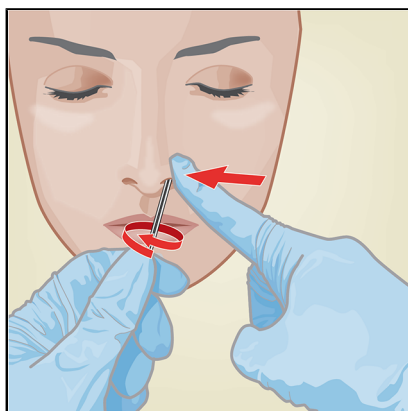

**Figura 2. Prelievo con tampone nasale per la prima narice**

2. Ripetere per l'altra narice con lo stesso tampone, applicando una pressione all'esterno della stessa (vedere la Figura 3). Per evitare la contaminazione del campione di analisi, la punta del tampone deve toccare solo l'interno della narice.

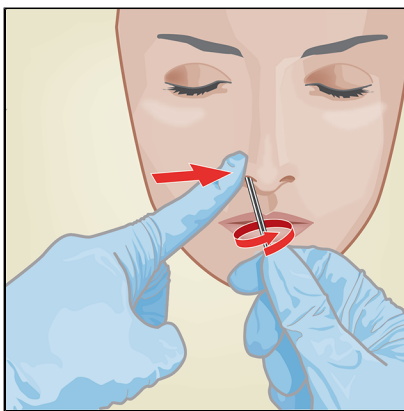

**Figura 3. Prelievo con tampone nasale per la seconda narice**


3. Estrarre il tampone e collocarlo nella provetta contenente 3 ml di mezzo di trasporto virale, 3 ml di soluzione fisiologica o 2 ml di eNAT. Spezzare il tampone sulla linea indicata e tappare bene la provetta di raccolta del campione di analisi.

## 13 Procedura

### 13.1 Preparazione della cartuccia

**Importante** Iniziare il test entro 30 minuti dall'introduzione del campione nella cartuccia.

1. Rimuovere una cartuccia dalla confezione.
2. Assicurarsi che la provetta di trasporto del campione di analisi sia chiuso.
3. Miscelare il campione di analisi capovolgendo rapidamente la provetta di trasporto per 5 volte. Aprire il tappo della provetta di trasporto del campione.
4. Aprire il coperchio della cartuccia.
5. Rimuovere la pipetta di trasferimento dall'involucro.
6. Schiacciare il bulbo superiore della pipetta di trasferimento **completamente, finché il bulbo superiore non è del tutto piatto**. Continuando a mantenere il bulbo completamente piatto, inserire la punta della pipetta nella provetta di trasporto del campione di analisi (vedere Figura 4).

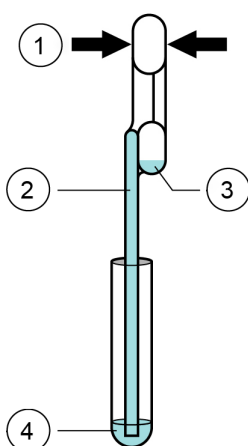

| Numero | Descrizione                 |
|--------|-----------------------------|
| 1      | Premere qui                 |
| 2      | Pipetta                     |
| 3      | Bulbo serbatoio di raccolta |
| 4      | Campione                    |

**Figura 4. Pipetta di trasferimento**

7. Mantenendo la pipetta sotto la superficie del liquido, rilasciare lentamente il bulbo superiore della pipetta per riempirla di campione prima di rimuoverla dalla provetta. È possibile che un po' di liquido entri nel serbatoio di raccolta (vedere Figura 4). Ciò non rappresenta un problema. Verificare che la pipetta non contenga bolle.

8. Per trasferire il campione all'interno della cartuccia, schiacciare completamente ancora una volta il bulbo superiore della pipetta finché non risulti del tutto piatto, per svuotare il contenuto della pipetta (300 µl) nell'apertura grande (camera del campione) della cartuccia mostrata in Figura 5. Nel serbatoio di troppopieno potrebbe rimanere del liquido. Smaltire la pipetta usata.



**Figura 5. Cartuccia Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus**

**Nota** Fare attenzione a erogare nella camera del campione l'intero volume del liquido. Se il volume di campione aggiunto alla cartuccia è insufficiente, possono verificarsi risultati falsi negativi.

9. Chiudere il coperchio della cartuccia.

## 13.2 Controlli esterni

I controlli esterni descritti nella sezione 9 sono disponibili ma non sono forniti in dotazione e possono essere utilizzati conformemente alle organizzazioni di accreditamento locali, nazionali e regionali, se applicabile.

Per eseguire un controllo utilizzando il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus, eseguire i seguenti passaggi:

1. Miscelare il controllo capovolgendo rapidamente la provetta del controllo esterno per 5 volte. Aprire il tappo della provetta del controllo esterno.
2. Aprire il coperchio della cartuccia.
3. Adoperando una pipetta di trasferimento pulita, trasferire un'aliquota di campione di controllo esterno (300 µl) nell'apertura grande della cartuccia (camera per il campione) rappresentata nella Figura 5.
4. Chiudere il coperchio della cartuccia.

## 13.3 Avvio del test in Cepheid OS 1.0

**Importante** Prima di iniziare il test, verificare che il sistema contenga moduli con il software Cepheid OS versione 1.0 e che nel software sia stato importato il file di definizione del saggio appropriato.

**Importante** In questa sezione sono riportati i passaggi predefiniti per il funzionamento del GeneXpert system with touchscreen. Per istruzioni dettagliate, vedere il *Manuale dell'operatore del sistema GeneXpert con touchscreen*.

**Nota** I passaggi da seguire possono variare se l'amministratore del sistema modifica il flusso di lavoro predefinito del sistema.

1. Accendere il GeneXpert system with touchscreen:
  - a) Accendere lo strumento GeneXpert II o GeneXpert IV. L'interruttore di alimentazione si trova sul retro dello strumento. Premere l'interruttore portandolo nella posizione **ACCESO (I)**.
  - b) Accendere il touchscreen. L'interruttore di alimentazione si trova sul retro del touchscreen. Premere l'interruttore portandolo nella posizione **ACCESO (I)**.
2. Effettuare l'accesso al software Cepheid OS inserendo il nome utente e la password.
3. Nella schermata PAGINA INIZIALE (HOME), toccare **NUOVA ANALISI (NEW TEST)**.
4. Immettere l'ID paziente.

5. Toccare **CONTINUA (CONTINUE)** e **CONFERMA (CONFIRM)**.
6. Immettere un ID campione.
7. Toccare **CONTINUA (CONTINUE)** e **CONFERMA (CONFIRM)**.
8. Eseguire la scansione del codice a barre della cartuccia. Tenere la cartuccia a circa 10 cm (4 pollici) dal lettore.

**Nota** Se non è possibile eseguire la scansione del codice a barre della cartuccia Xpert Xpress SARS-CoV-2, ripetere il test con una nuova cartuccia.

9. Dopo la scansione, toccare **CONFERMA (CONFIRM)**.
10. Se non è stato effettuato l'accesso, apparirà la schermata Inserire le credenziali per continuare (Enter Credentials to Continue). Immettere il proprio nome utente e la password, quindi toccare **Accesso (Login)**.
11. Si aprirà la schermata Preparazione della cartuccia (Cartridge Preparation). Guardare il video (se necessario) e preparare la cartuccia se non fosse già stato fatto. Toccare **CONTINUA (CONTINUE)**.
12. Caricare la cartuccia preparata.
13. Aprire lo sportello del modulo dello strumento sotto la luce verde lampeggiante.
14. Collocare la cartuccia sul fondo dell'alloggiamento del modulo, con l'etichetta rivolta verso l'esterno.

**Nota** Non spegnere o scollegare gli strumenti mentre un test è in esecuzione. Se si spegne o si scollega lo strumento GeneXpert o il touchscreen, il test si interromperà.

15. Premere lo sportello del modulo per chiuderlo. Lo sportello si bloccherà, la luce verde diventerà da lampeggiante a fissa e si visualizzerà la schermata Analisi in caricamento (Test Loading) seguita dalla schermata Analisi in corso (Test Running).  
Al termine dell'analisi comparirà la schermata Analisi completata (Test Completed).
16. Estrarre la cartuccia e smaltirla seguendo le linee guida della propria struttura in tema di smaltimento dei residui pericolosi.
17. Toccare **RAPPORTO (REPORT)** per visualizzare un rapporto dell'analisi.

### 13.4 Visualizzazione dei risultati in Cepheid OS 1.0

In questa sezione sono elencate le procedure principali per la visualizzazione e la stampa dei risultati nel software Cepheid 1.0. Per istruzioni più dettagliate sulla visualizzazione e la stampa dei risultati, consultare il *Manuale dell'operatore del sistema GeneXpert con touchscreen*.

**Nota** Se per la refertazione dei risultati si utilizza un sistema LIS, confermare che i risultati del LIS coincidano con quelli del sistema per l'ID del paziente; in presenza di conflitti, refertare solo i risultati del sistema.

1. Per visualizzare i risultati, fare clic sull'icona **Visualizza risultati (View Results)**.
2. Una volta completato il test, fare clic sul pulsante **Rapporto (Report)** nella finestra **Visualizza risultati (View Results)** per visualizzare e/o generare un file di rapporto in formato PDF.

### 13.5 Avvio del test in Cepheid OS 2.1 o versioni successive

**Prima di avviare il test, assicurarsi che:**

- Importante**
- il sistema stia eseguendo la versione corretta del software Cepheid OS mostrata nella sezione Materiali necessari ma non forniti;
  - nel software sia stato importato il file di definizione del saggio corretto;

**Nota** sia visualizzato il flusso di lavoro predefinito. L'amministratore del sistema potrebbe aver modificato il flusso di lavoro.

1. Accendere il sistema GeneXpert con touchscreen.
2. Effettuare l'accesso al software del sistema inserendo il nome utente e la password.
3. Nella scheda Moduli (Modules), toccare **Avvia test (Start test)**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un nuovo test e inserire le informazioni sul paziente e sul campione.

5. Acquisire tramite scansione o inserire manualmente il numero di serie della cartuccia. Durante la scansione, tenere la cartuccia a circa 3-7 cm (1-3 pollici) dal lettore. Il lettore proietta un mirino verde che dovrà essere centrato sul codice a barre. Un segnale acustico indica che la scansione è ultimata. Toccare **Continua**.
6. Selezionare il test desiderato e toccare **Continua**.
7. Se necessario, guardare il video di preparazione della cartuccia.
8. Nella schermata Conferma, rivedere tutti i dati e toccare **Conferma**.
9. Aprire lo sportello del modulo sotto la luce verde lampeggiante e inserire la cartuccia.
10. Chiudere completamente lo sportello del modulo della cartuccia premendo fino a bloccarlo. Il test viene avviato.
11. Al termine del test apparirà la schermata **Riepilogo dei risultati**. Aprire lo sportello del modulo ed estrarre la cartuccia.
12. Smaltire le cartucce usate negli appositi contenitori dei rifiuti, attenendosi alla prassi standard della propria struttura sanitaria.

## 13.6 Visualizzazione dei risultati in Cepheid OS 2.1 o versioni successive

La schermata dei risultati di Cepheid OS 2.1 interpreta automaticamente i risultati del test e li mostra chiaramente nella finestra **Visualizza risultati (View Results)**.

1. Toccare **Risultati (Results)**.
2. Toccare il test da visualizzare nella schermata Risultati (Results).
3. Fare clic su **OK**.
4. Per generare un file del rapporto in formato PDF, toccare **Visualizza rapporto (View Report)**.  
Nel manuale dell'operatore del sistema si possono trovare istruzioni più dettagliate per la visualizzazione e il caricamento dei risultati.

## 14 Controllo qualità

### 14.1 Controlli interni

Ciascuna cartuccia comprende un controllo per il trattamento dei campioni (SPC) e un controllo per la verifica della sonda (PCC).

**Controllo per il trattamento dei campioni (SPC)** – Assicura che il campione sia stato trattato correttamente. L'SPC verifica che il trattamento del campione sia avvenuto correttamente. Questo controllo rileva inoltre l'inibizione del saggio di PCR real time associata al campione, garantisce che le condizioni di reazione della PCR (temperatura e tempo) siano adeguate alla reazione di amplificazione e che i reagenti PCR siano funzionali. L'SPC deve essere positivo in un campione negativo e può essere negativo o positivo in un campione positivo. L'SPC si considera superato se soddisfa i criteri di accettazione convalidati.

**Controllo per la verifica della sonda (PCC)** – Prima che inizi la reazione PCR, il sistema GeneXpert misura il segnale di fluorescenza emesso dalle sonde, allo scopo di monitorare la reidratazione delle microsfele, il riempimento delle provette di reazione, l'integrità delle sonde e la stabilità dei coloranti. Il PCC si considera superato se soddisfa i criteri di accettazione convalidati.

### 14.2 Controlli esterni

I controlli esterni devono essere usati in conformità con i requisiti degli organismi di accreditamento locali, regionali e nazionali pertinenti.

## 15 Interpretazione dei risultati

I risultati vengono interpretati automaticamente dal sistema GeneXpert e sono chiaramente visualizzati nella finestra **Visualizza risultati (View Results)**. Il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus* fornisce i risultati in base al rilevamento dei rispettivi bersagli genici secondo gli algoritmi.

Il formato in cui vengono presentati i risultati del test può variare in base alla scelta del test da parte dell'operatore (test Xpress SARS-CoV-2\_Flu\_RSV plus, Xpress SARS-CoV-2\_Flu plus o Xpress SARS-CoV-2\_plus).

Tabella 1 mostra i risultati che si possono ottenere selezionando la modalità di test Xpress SARS-CoV-2\_Flu\_RSV plus.

**Tabella 1. Possibili risultati e interpretazione per Xpress SARS-CoV-2\_Flu\_RSV plus**

| Risultato                                                                                                                                                               | Interpretazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SARS-CoV-2 POSITIVO (SARS-CoV-2 POSITIVE)</b>                                                                                                                        | <p>L'RNA bersaglio del SARS-CoV-2 è stato rilevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il segnale di SARS-CoV-2 ha un valore Ct compreso nell'intervallo valido e un endpoint superiore all'impostazione minima.</li> <li>SPC: NA (non applicabile); l'SPC viene ignorato perché si è verificata l'amplificazione del bersaglio per SARS-CoV-2.</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul>                                                                                                                          |
| <b>Flu A POSITIVO (Flu A POSITIVE)</b>                                                                                                                                  | <p>L'RNA bersaglio dell'influenza A è stato rilevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il segnale di Flu A per il bersaglio RNA di Flu A1 o per il bersaglio RNA di Flu A2 oppure i segnali per entrambi i bersagli RNA hanno un Ct compreso nell'intervallo valido e un endpoint superiore all'impostazione della soglia.</li> <li>SPC: NA; l'SPC viene ignorato perché si è verificata l'amplificazione del bersaglio per Flu A.</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul>                                     |
| <b>Flu B POSITIVO (Flu B POSITIVE)</b>                                                                                                                                  | <p>L'RNA bersaglio dell'influenza B è stato rilevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il segnale di Flu B ha un valore Ct compreso nell'intervallo valido e un endpoint superiore all'impostazione minima.</li> <li>SPC: NA; l'SPC viene ignorato perché si è verificata l'amplificazione del bersaglio per Flu B.</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| <b>RSV POSITIVO (RSV POSITIVE)</b>                                                                                                                                      | <p>L'RNA bersaglio del virus RSV è stato rilevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il segnale dell'RSV ha un valore Ct compreso nell'intervallo valido e un endpoint superiore all'impostazione minima.</li> <li>SPC: NA; l'SPC viene ignorato perché si è verificata l'amplificazione del bersaglio per l'RSV.</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>SARS-CoV-2 NEGATIVO (SARS-CoV-2 NEGATIVE);<br/>Influenza A NEGATIVO (Flu A NEGATIVE);<br/>Influenza B NEGATIVO (Flu B NEGATIVE);<br/>RSV NEGATIVO (RSV NEGATIVE)</b> | <p>L'RNA bersaglio del SARS-CoV-2 non è stato rilevato; l'RNA bersaglio dell'influenza A non è stato rilevato; l'RNA bersaglio dell'influenza B non è stato rilevato; l'RNA bersaglio dell'RSV non è stato rilevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gli RNA bersaglio di SARS-CoV-2, Flu A, Flu B e RSV non sono stati rilevati.</li> <li>SPC: AMMESSO (PASS); l'SPC ha un valore Ct compreso nell'intervallo valido e un endpoint superiore all'impostazione minima</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul> |

| Risultato                           | Interpretazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NON VALIDO (INVALID)</b>         | <p>L'SPC o altre impostazioni di analisi non soddisfano i criteri di accettazione e non è stato rilevato alcun bersaglio. Ripetere il test in base alla Procedura di ripetizione del test, come descritto nella Sezione 16.2 delle istruzioni per l'uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPC: RESPINTO (FAIL); l'SPC e i segnali di SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e RSV non hanno un valore Ct compreso nell'intervallo valido e l'endpoint è inferiore all'impostazione minima.</li> <li>L'amplificazione di SARS-CoV-2 non soddisfa le specifiche</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ERRORE (ERROR)</b>               | <p>È impossibile determinare la presenza o l'assenza dell'RNA di SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e RSV. Ripetere il test in base alla Procedura di ripetizione del test, come descritto nella Sezione 16.2 delle istruzioni per l'uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SARS-CoV-2: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>Influenza A: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>Influenza B: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>RSV: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>SPC: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>Verifica della sonda: RESPINTO (FAIL)<sup>1</sup>; uno o tutti i risultati della verifica della sonda non sono validi</li> </ul> <p><sup>1</sup>Se la verifica della sonda viene superata, l'errore è causato dal superamento dell'intervallo accettabile da parte del limite massimo di pressione, dalla mancata aggiunta del campione o dal guasto di un componente del sistema.</p> |
| <b>NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</b> | <p>È impossibile determinare la presenza o l'assenza dell'RNA di SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e RSV. Ripetere il test in base alla Procedura di ripetizione del test, come descritto nella Sezione 16.2 delle istruzioni per l'uso. <b>NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</b> indica che i dati raccolti sono insufficienti. Ad esempio, l'operatore ha interrotto un test in corso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SARS-CoV-2: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>Influenza A: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>Influenza B: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>RSV: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>SPC: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>Verifica della sonda: N/D</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |

Se l'SPC è negativo e i risultati sono positivi per un bersaglio qualsiasi, si considerano validi i risultati per tutti i bersagli.

Se solo un bersaglio virale è positivo ma si sospetta una infezione concomitante con più bersagli, il campione deve essere rianalizzato con un altro test approvato o autorizzato, se l'infezione concomitante cambierebbe la gestione clinica.

La Tabella 2 mostra i risultati che si possono ottenere selezionando la modalità di test Xpress SARS-CoV-2\_Flu plus.

Tabella 2. Possibili risultati e interpretazione per Xpress SARS-CoV-2\_Flu plus

| Risultato                                                                                                                      | Interpretazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SARS-CoV-2 POSITIVO (SARS-CoV-2 POSITIVE)</b>                                                                               | <p>L'RNA bersaglio del SARS-CoV-2 è stato rilevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il segnale di SARS-CoV-2 ha un valore Ct compreso nell'intervallo valido e un endpoint superiore all'impostazione minima.</li> <li>SPC: NA (non applicabile); l'SPC viene ignorato perché si è verificata l'amplificazione del bersaglio per SARS-CoV-2.</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Flu A POSITIVO (Flu A POSITIVE)</b>                                                                                         | <p>L'RNA bersaglio dell'influenza A è stato rilevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il segnale di Flu A per il bersaglio RNA di Flu A1 o per il bersaglio RNA di Flu A2 oppure i segnali per entrambi i bersagli RNA hanno un Ct compreso nell'intervallo valido e un endpoint superiore all'impostazione della soglia.</li> <li>SPC: NA; l'SPC viene ignorato perché si è verificata l'amplificazione del bersaglio per Flu A.</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul>                                                                                                                     |
| <b>Flu B POSITIVO (Flu B POSITIVE)</b>                                                                                         | <p>L'RNA bersaglio dell'influenza B è stato rilevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il segnale di Flu B ha un valore Ct compreso nell'intervallo valido e un endpoint superiore all'impostazione minima.</li> <li>SPC: NA; l'SPC viene ignorato perché si è verificata l'amplificazione del bersaglio per Flu B.</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SARS-CoV-2 NEGATIVO (SARS-CoV-2 NEGATIVE); Influenza A NEGATIVO (Flu A NEGATIVE); Influenza B NEGATIVO (Flu B NEGATIVE)</b> | <p>L'RNA bersaglio di SARS-CoV-2 non è stato rilevato; l'RNA bersaglio dell'influenza A non è stato rilevato; l'RNA bersaglio dell'influenza B non è stato rilevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gli RNA bersaglio di SARS-CoV-2, Flu A e Flu B non sono stati rilevati.</li> <li>SPC: AMMESSO (PASS); l'SPC ha un valore Ct compreso nell'intervallo valido e un endpoint superiore all'impostazione minima</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <b>NON VALIDO (INVALID)</b>                                                                                                    | <p>L'SPC o altre impostazioni di analisi non soddisfano i criteri di accettazione e non è stato rilevato alcun bersaglio. Ripetere il test in base alla Procedura di ripetizione del test, come descritto nella Sezione 16.2 delle istruzioni per l'uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPC: RESPINTO (FAIL); l'SPC e i segnali di SARS-CoV-2, influenza A e influenza B non hanno un valore Ct compreso nell'intervallo valido e l'endpoint è inferiore all'impostazione minima.</li> <li>L'amplificazione di SARS-CoV-2 non soddisfa le specifiche</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul> |

| Risultato                           | Interpretazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ERRORE (ERROR)</b>               | <p>È impossibile determinare la presenza o l'assenza dell'RNA di SARS-CoV-2, influenza A e influenza B. Ripetere il test in base alla Procedura di ripetizione del test, come descritto nella Sezione 16.2 delle istruzioni per l'uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SARS-CoV-2: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>• Influenza A: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>• Influenza B: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>• SPC: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>• Verifica della sonda: RESPINTO (FAIL)<sup>1</sup>; uno o tutti i risultati della verifica della sonda non sono validi</li> </ul> <p><sup>1</sup> Se la verifica della sonda viene superata, l'errore è causato dal superamento dell'intervallo accettabile da parte del limite massimo di pressione, dalla mancata aggiunta del campione o dal guasto di un componente del sistema.</p> |
| <b>NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</b> | <p>È impossibile determinare la presenza o l'assenza dell'RNA di SARS-CoV-2, influenza A e influenza B. Ripetere il test in base alla Procedura di ripetizione del test, come descritto nella Sezione 16.2 delle istruzioni per l'uso. <b>NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</b> indica che i dati raccolti sono insufficienti. Ad esempio, l'operatore ha interrotto un test in corso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SARS-CoV-2: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>• Influenza A: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>• Influenza B: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>• SPC: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>• Verifica della sonda: N/D</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |

Se l'SPC è negativo e i risultati sono positivi per un bersaglio qualsiasi, si considerano validi i risultati per tutti i bersagli.

Se solo un bersaglio virale è positivo ma si sospetta una infezione concomitante con più bersagli, il campione deve essere rianalizzato con un altro test approvato o autorizzato, se l'infezione concomitante cambierebbe la gestione clinica.

La Tabella 3 mostra i risultati che si possono ottenere selezionando la modalità di test Xpress SARS-CoV-2\_plus.

Tabella 3. Possibili risultati e interpretazione per Xpress SARS-CoV-2\_plus

| Risultato                                            | Interpretazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SARS-CoV-2 POSITIVO<br/>(SARS-CoV-2 POSITIVE)</b> | <p>L'RNA bersaglio del SARS-CoV-2 è stato rilevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il segnale di SARS-CoV-2 ha un valore Ct compreso nell'intervallo valido e un endpoint superiore all'impostazione minima.</li> <li>SPC: NA (non applicabile); l'SPC viene ignorato perché si è verificata l'amplificazione del bersaglio per SARS-CoV-2.</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SARS-CoV-2 NEGATIVO<br/>(SARS-CoV-2 NEGATIVE)</b> | <p>L'RNA bersaglio del SARS-CoV-2 non è stato rilevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'RNA bersaglio del SARS-CoV-2 non è stato rilevato.</li> <li>SPC: AMMESSO (PASS); l'SPC ha un valore Ct compreso nell'intervallo valido e un endpoint superiore all'impostazione minima</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NON VALIDO (INVALID)</b>                          | <p>L'SPC o altre impostazioni di analisi non soddisfano i criteri di accettazione e il SARS-CoV-2 non è stato rilevato. Ripetere il test in base alla Procedura di ripetizione del test, come descritto nella Sezione 16.2 delle istruzioni per l'uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPC: RESPINTO (FAIL); l'SPC e i segnali di SARS-CoV-2 non hanno un valore Ct compreso nell'intervallo valido e l'endpoint è inferiore all'impostazione minima.</li> <li>L'amplificazione di SARS-CoV-2 non soddisfa le specifiche</li> <li>Verifica della sonda: AMMESSO (PASS); tutti i risultati della verifica della sonda sono validi</li> </ul>                                      |
| <b>ERRORE (ERROR)</b>                                | <p>Non è possibile determinare la presenza o l'assenza dell'RNA di SARS-CoV-2. Ripetere il test in base alla Procedura di ripetizione del test, come descritto nella Sezione 16.2 delle istruzioni per l'uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPC: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>Verifica della sonda: RESPINTO (FAIL)<sup>1</sup>; uno o tutti i risultati della verifica della sonda non sono validi</li> </ul> <p><sup>1</sup> Se la verifica della sonda viene superata, l'errore è causato dal superamento dell'intervallo accettabile da parte del limite massimo di pressione, dalla mancata aggiunta del campione o dal guasto di un componente del sistema.</p> |
| <b>NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</b>                  | <p>Non è possibile determinare la presenza o l'assenza dell'RNA di SARS-CoV-2. Ripetere il test in base alla Procedura di ripetizione del test, come descritto nella Sezione 16.2 delle istruzioni per l'uso. <b>NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</b> indica che i dati raccolti sono insufficienti. Ad esempio, l'operatore ha interrotto un test in corso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SARS-CoV-2: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>SPC: NESSUN RISULTATO (NO RESULT)</li> <li>Verifica della sonda: N/D</li> </ul>                                                                                                                                                       |

È possibile eseguire il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus per rilevare SARS-CoV-2, influenza e RSV selezionando Xpress SARS-CoV-2\_Flu\_RSV plus dal menu Seleziona test (Select Test); solo SARS-CoV-2 e influenza selezionando Xpress SARS-CoV-2\_Flu plus; o solo SARS-CoV-2 selezionando Xpress SARS-CoV-2\_plus. La modalità di test Xpress SARS-CoV-2\_plus include una funzione di termine anticipato del saggio (Early Assay Termination, EAT) grazie alla quale il risultato si ottiene in un tempo minore nei campioni di analisi ad alto titolo, qualora il segnale proveniente dal bersaglio SARS-CoV-2 raggiunga una soglia predeterminata prima del completamento di tutti i 45 cicli di PCR. Quando i titoli di SARS-CoV-2 sono sufficientemente alti per attivare la funzione EAT, è possibile che non si visualizzi la curva di amplificazione SPC e che i relativi risultati non siano refertati.

## 16 Ripetizioni del test

### 16.1 Motivi per ripetere il test

Se si ottiene uno dei risultati indicati di seguito, ripetere il test una volta attenendosi alle istruzioni riportate nella Sezione 16.2.

- Un risultato **INVALID** (NON VALIDO) indica che il controllo SPC non è riuscito. Il campione non è stato trattato correttamente, la PCR è stata inibita oppure il campione non è stato raccolto correttamente. Inoltre è possibile che altre impostazioni dell'analisi del saggio volte a produrre un risultato valido non siano state rispettate.
- Un risultato **ERROR** (ERRORE) potrebbe derivare, fra l'altro, da un controllo per la verifica della sonda respinto, dal guasto di un componente del sistema, dall'assenza di campione o dal superamento dei limiti massimi di pressione.
- **NO RESULT** (NESSUN RISULTATO) indica che i dati raccolti sono insufficienti. Ad esempio, il test di integrità della cartuccia non è stato superato, l'operatore ha interrotto l'esecuzione di un test oppure si è verificata un'interruzione di corrente.
- Poiché l'incidenza di infezione concomitante con tre o più virus (influenza A, influenza B, RSV e SARS-CoV-2) è bassa, si raccomanda di ripetere il test se in un singolo campione vengono rilevati gli acidi nucleici di tre o più virus.

Se un controllo esterno non ottiene l'esito previsto, ripetere il test di controllo esterno e/o contattare il Supporto Tecnico di Cepheid per assistenza.

### 16.2 Procedura di ripetizione del test

Per verificare nuovamente un risultato non determinato (**INVALID** (NON VALIDO), **NO RESULT** (NESSUN RISULTATO) o **ERROR** (ERRORE)), utilizzare una nuova cartuccia.

Utilizzare il campione avanzato dalla provetta originale di terreno di trasporto del campione o da una nuova provetta di controllo esterno.

1. Indossare un paio di guanti puliti. Procurarsi una nuova cartuccia Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus* e una nuova pipetta di trasferimento.
2. Controllare che la provetta di trasporto del campione o la provetta di controllo esterno sia chiusa.
3. Miscelare il campione capovolgendo rapidamente per 5 volte la provetta del terreno di trasporto del campione o la provetta di controllo esterno. Aprire il tappo della provetta di trasporto del campione o della provetta di controllo esterno.
4. Aprire il coperchio della cartuccia.
5. Utilizzando una pipetta di trasferimento pulita (in dotazione), trasferire il campione (un prelievo) nella camera del campione con l'apertura grande della cartuccia.
6. Chiudere il coperchio della cartuccia.

## 17 Limitazioni

- Le prestazioni del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus* sono state stabilite solo in campioni da tampone nasofaringeo e nasale anteriore. L'uso del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus* con altri tipi di campione non è stato valutato e le caratteristiche prestazionali non sono note.
- Le prestazioni di questo test sono state stabilite sulla base della valutazione di un numero limitato di campioni clinici. Le prestazioni cliniche non sono state stabilite per tutte le varianti in circolazione, ma si prevede che riflettano le varianti prevalenti in circolazione al momento e nel luogo della valutazione clinica. Le prestazioni al momento dell'analisi possono variare in funzione delle varianti in circolazione, compresi i nuovi ceppi emergenti di SARS-CoV-2 e la loro prevalenza, che cambia nel tempo.
- Le prestazioni di questo dispositivo non sono state valutate in una popolazione vaccinata contro il COVID-19.
- Così come accade per qualsiasi test molecolare, le mutazioni a carico delle regioni bersaglio per il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus* potrebbero influenzare il legame con i primer e/o con le sonde, di conseguenza il virus potrebbe non essere rilevato oppure potrebbe essere rilevato in modo meno prevedibile.
- In alcuni campioni con concentrazioni virali di SARS-CoV-2 molto elevate, le impostazioni di analisi volte a ridurre i rischi di risultati falsi positivi causati da una rilevazione aspecifica o irregolare della fluorescenza possono determinare un risultato **INVALID** (NON VALIDO) del test.
- Questo test non può escludere malattie causate da altri agenti patogeni batterici o virali.

- Le prestazioni di questo test sono state convalidate esclusivamente mediante le procedure riportate in questo foglietto illustrativo. Qualsiasi modifica apportata a queste procedure può alterare le prestazioni del test.
- Risultati errati del test potrebbero verificarsi a causa di errori di prelievo dei campioni di analisi, mancata osservanza delle procedure consigliate per il prelievo, la manipolazione e la conservazione dei campioni, errori tecnici o scambio di campioni. La rigorosa osservanza delle istruzioni del presente foglietto illustrativo è necessaria per evitare risultati erranei.
- Risultati falsi negativi possono verificarsi se il virus è presente a livelli inferiori al limite di rilevamento del test.
- I risultati negativi non escludono la possibilità di infezione da SARS-CoV-2, influenza o RSV, e non devono pertanto essere usati come unica base per il trattamento o per altre decisioni riguardanti la gestione dei pazienti.
- I risultati del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus* devono essere correlati all'anamnesi, ai dati epidemiologici e agli altri dati a disposizione del medico che valuta il paziente.
- L'acido nucleico virale può persistere *in vivo* indipendentemente dall'infettività del virus. Il rilevamento dei bersagli degli analiti non implica che i virus corrispondenti siano infettivi o che siano gli agenti eziologici dei sintomi clinici.
- Questo test è stato valutato per l'uso esclusivo con materiale derivante da campioni di analisi umani.
- Si tratta di un test qualitativo e non fornisce il valore quantitativo del microrganismo rilevato.
- Questo test non è stato valutato per i pazienti che non presentino segni e sintomi di infezione delle vie respiratorie.
- Questo test non è stato valutato per il monitoraggio del trattamento dell'infezione.
- Questo test non è stato valutato per lo screening del sangue o degli emoderivati al fine di rilevare la presenza di SARS-CoV-2, influenza o RSV.
- L'effetto delle sostanze interferenti è stato valutato solo per quelle elencate nella documentazione del test. L'interferenza da parte di sostanze diverse da quelle descritte può comportare risultati errati.
- I risultati di studi analitici condotti su campioni artificiali co-infettati hanno evidenziato una potenziale interferenza competitiva di influenza B o RSV A a basse concentrazioni (~3X LoD) quando la concentrazione dell'influenza A è rispettivamente > 1,7e5 copie di RNA/ml o 1,7e6 copie di RNA/ml. Inoltre, esiste un potenziale di interferenza competitiva dell'influenza B a una bassa concentrazione (~3X LoD) quando la concentrazione di SARS-CoV-2 è > 1e5 copie di RNA/ml.
- La reattività crociata con microrganismi delle vie respiratorie diversi da quelli descritti nel presente documento può portare a risultati errati.
- La recente esposizione del paziente a FluMist® o ad altri vaccini antinfluenzali con virus attenuato vivo può causare risultati positivi imprecisi.
- Zicam al 15% (p/v) potrebbe interferire con il rilevamento di bassi livelli di influenza B e RSV A.
- Poiché il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus* non è in grado di distinguere tra i bersagli genici N2, RdRP ed E, la presenza di altri coronavirus del lignaggio B, genere *Betacoronavirus*, compreso il SARS-CoV, può causare un risultato falso positivo. Attualmente non è noto se qualcuno di questi altri coronavirus circoli nella popolazione umana.
- Questo test non è destinato a differenziare i sottogruppi dell'RSV, i sottotipi del virus dell'influenza A né i lignaggi del virus dell'influenza B. Se è necessaria la differenziazione di specifici sottotipi e ceppi di RSV o influenzali, si consiglia di eseguire ulteriori test, previa consultazione con le unità sanitarie pubbliche, statali o locali.
- Non sono state stabilite le prestazioni con mezzi contenenti tiocianato di guanidina (GTC) diversi da eNAT

## 18 Caratteristiche prestazionali

### 18.1 Valutazione clinica

Le prestazioni del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus* sono state valutate utilizzando campioni clinici di archivio da tampone nasofaringeo (NF) e tampone nasale (NS) in mezzo di trasporto virale o mezzo di trasporto universale. I campioni di archivio sono stati selezionati consecutivamente in base alla data e al risultato dell'analisi precedentemente noto. Un totale di 279 campioni di analisi da tampone nasofaringeo e 239 da tampone nasale sono stati analizzati con Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus* parallelamente a un test di RT-PCR a marchio CE per SARS-CoV-2 e un test RT-PCR a marchio CE per influenza/RSV con metodica randomizzata e in cieco.

Sono stati determinati la percentuale di concordanza positiva (PPA), la percentuale di concordanza negativa (NPA) e il tasso di indeterminati confrontando i risultati del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus* con i risultati di un test di RT-PCR per SARS-CoV-2 a marchio CE per il bersaglio SARS-CoV-2 e con i risultati di un test RT-PCR a marchio CE per i bersagli, rispettivamente, influenza A, influenza B e RSV.

Per i campioni di analisi da tampone NF, Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus ha dimostrato una PPA e una NPA, rispettivamente, del 100,0% e del 100,0% per SARS-CoV-2; del 100,0% e del 100,0% per l'influenza A; del 100,0% e del 100,0% per l'influenza B; del 100,0% e del 100,0% per RSV (Tabella 4). Il tasso iniziale di indeterminati del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus è stato dello 0,7% (2/279). Alla ripetizione del test, i due (2) campioni di analisi hanno dato risultati validi. Il tasso finale di indeterminati del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus è stato dello 0,0% (0/279).

**Tabella 4. Risultati delle prestazioni di Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus utilizzando campioni da tampone NF**

| Bersaglio   | Numero di campioni di analisi | TP | FP | TN  | FN | PPA (IC al 95%)            | NPA (IC al 95%)            |
|-------------|-------------------------------|----|----|-----|----|----------------------------|----------------------------|
| SARS-CoV-2  | 279                           | 66 | 0  | 213 | 0  | 100,0%<br>(94,5% - 100,0%) | 100,0%<br>(98,2% - 100,0%) |
| Influenza A | 264                           | 51 | 0  | 213 | 0  | 100,0%<br>(93,0% - 100,0%) | 100,0%<br>(98,2% - 100,0%) |
| Influenza B | 264                           | 46 | 0  | 218 | 0  | 100,0%<br>(92,3% - 100,0%) | 100,0%<br>(98,3% - 100,0%) |
| RSV         | 264                           | 47 | 0  | 217 | 0  | 100,0%<br>(92,4% - 100,0%) | 100,0%<br>(98,3% - 100,0%) |

TP: Vero positivo; FP: Falso positivo; TN: Vero negativo; FN: Falso negativo; IC: Intervallo di confidenza

Per i campioni di analisi NS, Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus ha dimostrato una PPA e una NPA, rispettivamente, del 100,0% e del 100,0% per SARS-CoV-2; del 100,0% e del 99,5% per l'influenza A; del 100,0% e del 100,0% per l'influenza B; del 100,0% e del 100,0% per RSV (Tabella 5). Il tasso iniziale di indeterminati del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus è stato dell'1,3% (3/240). Alla ripetizione del test, due (2) dei tre (3) campioni di analisi hanno dato risultati validi. Un campione di analisi non è stato testato nuovamente a causa di volume insufficiente. Il tasso finale di indeterminati del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus è stato dello 0,4% (1/240).

**Tabella 5. Risultati delle prestazioni di Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus utilizzando campioni di analisi da tampone NS**

| Bersaglio   | Numero di campioni di analisi | TP | FP | TN  | FN | PPA (IC al 95%)            | NPA (IC al 95%)            |
|-------------|-------------------------------|----|----|-----|----|----------------------------|----------------------------|
| SARS-CoV-2  | 239                           | 47 | 0  | 192 | 0  | 100,0%<br>(92,4% - 100,0%) | 100,0%<br>(98,0% - 100,0%) |
| Influenza A | 239                           | 48 | 1  | 191 | 0  | 100,0%<br>(92,6% - 100,0%) | 99,5%<br>(97,1% - 99,9%)   |
| Influenza B | 239                           | 48 | 0  | 191 | 0  | 100,0%<br>(92,6% - 100,0%) | 100,0%<br>(98,0% - 100,0%) |
| RSV         | 239                           | 47 | 0  | 192 | 0  | 100,0%<br>(92,4% - 100,0%) | 100,0%<br>(98,0% - 100,0%) |

TP: Vero positivo; FP: Falso positivo; TN: Vero negativo; FN: Falso negativo; IC: Intervallo di confidenza

## 18.2 Sensibilità analitica (limite di rilevamento)

La sensibilità analitica del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus è stata stimata inizialmente utilizzando due lotti di reagente tramite l'analisi di diluizioni limitanti di sette virus respiratori (NATrol SARS-CoV-2, influenza A H1, influenza A H3, influenza B lignaggio Victoria, influenza B lignaggio Yamagata, RSV A e RSV B) in una matrice clinica negativa costituita da un pool di tamponi nasofaringei, seguendo le indicazioni riportate nel documento EP17-A2 del Clinical and

Laboratory Standards Institute (CLSI). I valori stimati del LoD, determinati mediante analisi di regressione Probit, sono stati verificati utilizzando due lotti di reagenti Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. I valori del LoD verificati per i virus analizzati sono riepilogati nella Tabella 6.

**Tabella 6. Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus Limite di rilevamento**

| Virus/ceppo                   | Concentrazione LoD           |
|-------------------------------|------------------------------|
| SARS-CoV-2 (USA-WA1/2020)     | 138 copie/ml                 |
| Influenza A/Idaho/07/2018     | 0,007 TCID <sub>50</sub> /ml |
| Influenza A/Hong Kong/45/2019 | 0,44 FFU/ml                  |
| Influenza B/Washington/2/2019 | 12,9 CEID <sub>50</sub> /ml  |
| Influenza B/Wisconsin/10/2016 | 2,4 TCID <sub>50</sub> /ml   |
| RSV A/2/Australia/61          | 0,33 TCID <sub>50</sub> /ml  |
| RSV B/9320/MA/77              | 0,37 TCID <sub>50</sub> /ml  |

### 18.3 Reattività analitica (inclusività)

L'inclusività di Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus è stata valutata il 27 settembre 2021 utilizzando l'analisi *in silico* degli ampliconi del saggio in relazione a 2.685.478 sequenze di SARS-CoV-2 disponibili nel database di genomi GISAID per tre bersagli: E, N2 e RdRP.

Per l'analisi del bersaglio E, 3.818 sequenze sono state escluse a causa di nucleotidi ambigui, il che ha ridotto il totale a 2.681.660 sequenze. Delle 2.681.660 sequenze GISAID, 2.667.594 (99,48%) erano una corrispondenza esatta per l'amplicone del bersaglio E di SARS-CoV-2 generato con il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. Per 13.990 sequenze sono state osservate mancate corrispondenze a singolo nucleotide e per 76 sequenze sono state osservate due o più mancate corrispondenze. Delle 76 sequenze con due o più mancate corrispondenze, 43 sequenze contenevano 2 o 3 mancate corrispondenze nella regione del primer forward; una sequenza conteneva 3 mancate corrispondenze nella regione del primer reverse; una sequenza conteneva 2 mancate corrispondenze nel primer forward e 2 mancate corrispondenze nel primer reverse. Queste mancate corrispondenze doppie o triple potrebbero avere un impatto negativo sulle prestazioni del saggio.

Per l'analisi del bersaglio N2, 4.110 sequenze sono state escluse a causa di nucleotidi ambigui, il che ha ridotto il totale utilizzato nella valutazione a 2.681.368 sequenze. Delle 2.681.368 sequenze GISAID, 2.608.487 (97,3%) erano una corrispondenza esatta per l'amplicone del bersaglio N2 di SARS-CoV-2 generato con il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. Per 70.212 sequenze sono state osservate mancate corrispondenze a singolo nucleotide. Per 2.669 sono state osservate due o tre mancate corrispondenze. Delle 31 sequenze con tre posizioni di variante, 5 sequenze presentavano due dei nucleotidi di mancata corrispondenza nella regione della sonda, mentre 5 sequenze presentavano due dei nucleotidi di mancata corrispondenza nella regione del primer reverse. Queste doppie mancate corrispondenze potevano esercitare un impatto sul legame della sonda o del primer reverse. Si prevede che nessuna delle altre mancate corrispondenze abbia un impatto negativo sulle prestazioni del saggio.

L'RdRP viene amplificato utilizzando un set primer/sonda semi-nested; per l'analisi *in silico* viene usato solo l'amplicone interno. Per l'analisi del bersaglio RdRP, 1.374 sequenze sono state escluse a causa di nucleotidi ambigui, il che ha ridotto il totale a 2.684.104 sequenze. Delle 2.684.104 sequenze GISAID, 2.657.136 (99,0%) erano una corrispondenza esatta per l'amplicone del bersaglio RdRP di SARS-CoV-2 generato con il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. Per 26.864 sequenze sono state osservate mancate corrispondenze a singolo nucleotide e per 77 sequenze sono state osservate due o più mancate corrispondenze. Due sequenze presentano 5 mancate corrispondenze, tre situate nella regione della sonda e due nella regione del primer reverse, mentre 20 sequenze presentano due mancate corrispondenze nucleotidiche nella regione del primer forward o della sonda. Queste mancate corrispondenze potevano esercitare un impatto sul legame della sonda o del primer reverse. Si prevede che nessuna delle altre mancate corrispondenze abbia un impatto negativo sulle prestazioni del saggio.

Oltre all'analisi *in silico* dei primer e delle sonde SARS-CoV-2 per determinare l'inclusività, l'inclusività del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus è stata valutata mediante test al banco rispetto a molteplici ceppi di SARS-CoV-2, influenza A H1N1 (stagionale pre-2009), influenza A H1N1 (pandemica 2009), influenza A H3N2 (stagionale), influenza aviaria A (H5N1, H5N2, H6N2, H7N2, H7N3, H2N2, H7N9 e H9N2), influenza B (ceppi rappresentativi dei lignaggi Victoria e Yamagata) e sottogruppi A e B del virus respiratorio sinciziale (RSV A e RSV B) a livelli vicini al LoD analitico. In questo studio con il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus sono stati valutati complessivamente 84 ceppi costituiti da 5

ceppi del virus SARS-CoV-2, 4 trascritti di RNA in vitro di SARS-CoV-2 rappresentanti ceppi di varianti, 69 ceppi di virus influenzali (48 di influenza A e 21 di influenza B) e 6 ceppi di RSV (4 di RSV A e 2 di RSV B). Sono stati analizzati tre replicati per ciascun ceppo. Tutti i ceppi di SARS-CoV-2, influenza e RSV sono risultati positivi in tutti e tre i replicati. I risultati sono riportati nella Tabella 7.

**Tabella 7. Reattività analitica (inclusività) del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus**

| Virus                       | Ceppo                                                          | Titolo analizzato             | SARS-CoV-2 | Influenza A | Influenza B | RSV |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-----|
| SARS-CoV-2                  | NATrol SARS-CoV-2 USA-WA1/2020                                 | 412 copie/ml                  | POS        | NEG         | NEG         | NEG |
|                             | SARS-CoV-2/Hong Kong/VM20001061/2020                           | 0,5 TCID <sub>50</sub> /ml    | POS        | NEG         | NEG         | NEG |
|                             | SARS-CoV-2/Italy-INMI1                                         | 4 TCID <sub>50</sub> /ml      | POS        | NEG         | NEG         | NEG |
|                             | SARS-CoV-2/South_Africa/KRISP-K005325/2020                     | 0,2 TCID <sub>50</sub> /ml    | POS        | NEG         | NEG         | NEG |
|                             | SARS-CoV-2/England/204820464/2020                              | 0,5 TCID <sub>50</sub> /ml    | POS        | NEG         | NEG         | NEG |
|                             | SARS-CoV-2 RNA USA/WA2/2020(C09) <sup>a</sup>                  | 100 copie/ml                  | POS        | NEG         | NEG         | NEG |
|                             | SARS-CoV-2RNA/England/205041766/2020(C14) <sup>a</sup>         | 100 copie/ml                  | POS        | NEG         | NEG         | NEG |
|                             | SARS-CoV-2 RNA /England/MILK-9E05B3/2020 (C15) <sup>a</sup>    | 200 copie/ml                  | POS        | NEG         | NEG         | NEG |
|                             | SARS-CoV-2 RNA /Japan (Brazil)/IC-0564/2021 (C17) <sup>a</sup> | 100 copie/ml                  | POS        | NEG         | NEG         | NEG |
| Influenza A H1N1 (pre-2009) | A/suina/Iowa/15/30                                             | 30 TCID <sub>50</sub> /ml     | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/WS/33                                                        | 5,0 CEID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/PR/8/34                                                      | 20 CEID <sub>50</sub> /ml     | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/Mal/302/54                                                   | 0,156 CEID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/Denver/1/57                                                  | 10 CEID <sub>50</sub> /ml     | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/New Jersey/8/76                                              | 5,0 CEID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/New Caledonia/20/1999                                        | 0,10 TCID <sub>50</sub> /ml   | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/New York/55/2004                                             | 30 TCID <sub>50</sub> /ml     | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/Solomon Island/3/2006                                        | 0,0159 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/Taiwan/42/06                                                 | 0,0159 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/Brisbane/59/2007                                             | 0,060 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/suino/NY/02/2009                                             | 20 TCID <sub>50</sub> /ml     | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
| Influenza A H1N1 (pdm2009)  | A/Colorado/14/2012                                             | 0,13 TCID <sub>50</sub> /ml   | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/Michigan/45/2015                                             | 100 CEID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/Iowa/53/2015                                                 | 100 CEID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                             | A/Michigan/272/2017                                            | 1,0 TCID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |

| Virus                            | Ceppo                                               | Titolo analizzato             | SARS-CoV-2 | Influenza A | Influenza B | RSV |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-----|
|                                  | A/Idaho/07/2018                                     | 0,0159 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Wisconsin/505/2018                                | 0,25 TCID <sub>50</sub> /ml   | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Hawaii/66/2019                                    | 100 CEID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Indiana/02/2020                                   | NA <sup>b</sup>               | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
| Influenza A H3N2 (stagionale)    | A/Aichi/2/68                                        | 2,0 CEID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Hong Kong/8/68                                    | 2,0 CEID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Port Chalmers/1/73                                | 100 CEID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Hawaii/15/2001                                    | 100 CEID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Wisconsin/67/05 <sup>c</sup>                      | 0,22 TCID <sub>50</sub> /ml   | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Brisbane/10/2007                                  | 0,025 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Minnesota/11/2010                                 | 30 CEID <sub>50</sub> /ml     | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Indiana/08/2011                                   | 0,25 TCID <sub>50</sub> /ml   | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Texas/50/2012                                     | 0,050 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Alaska/232/2015                                   | 20 CEID <sub>50</sub> /ml     | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016                     | 20 CEID <sub>50</sub> /ml     | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Texas/71/2017                                     | 1,0 FFU/ml                    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Kansas/14/2017                                    | 1,0 FFU/ml                    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Wisconsin/04/2018                                 | 1,0 FFU/ml                    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Arizona/45/2018                                   | 2,0 FFU/ml                    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Hong Kong/45/2019                                 | 2,0 FFU/ml                    | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
| Influenza aviaria A <sup>d</sup> | A/anatra selvatica/ NY/6750/78 (H2N2)               | <1 pg/μl                      | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/anatra/Hunan/ 795/2002 (H5N1)                     | <1 pg/μl                      | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Vietnam/1194/ 2004 (H5N1)                         | <1 pg/μl                      | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/Anhui/01/ 2005 (H5N1)                             | <1 pg/μl                      | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/occhialino giapponese/ Hong Kong/1038/2006 (H5N1) | <1 pg/μl                      | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/anatra selvatica/ WI/34/75 (H5N2)                 | <1 pg/μl                      | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/pollo/CA431/00 (H6N2)                             | <1 pg/μl                      | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/anatra/ LTC-10-82743 (H7N2)                       | <1 pg/μl                      | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                  | A/pollo/New Jersey/15086/3 (H7N3)                   | <1 pg/μl                      | NEG        | POS         | NEG         | NEG |

| Virus                           | Ceppo                                  | Titolo analizzato            | SARS-CoV-2 | Influenza A | Influenza B | RSV |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|-----|
|                                 | A/Anhui/1/2013 (H7N9)                  | 0,612 ng/μl                  | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                 | A/Shanghai/1/2013 (H7N9)               | NA <sup>e</sup>              | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
|                                 | A/pollo/Korea/38349-p96323/1996 (H9N2) | <1 pg/μl                     | NEG        | POS         | NEG         | NEG |
| Influenza B                     | B/Lee/40                               | 1,0 PFU/ml                   | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Allen/45                             | 0,25 CEID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/GL/1739/54                           | 0,50 CEID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Maryland/1/59                        | 1,0 CEID <sub>50</sub> /ml   | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Taiwan/2/62                          | 1,0 CEID <sub>50</sub> /ml   | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Hong Kong/5/72                       | 1,0 CEID <sub>50</sub> /ml   | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
| Influenza B, lignaggio Victoria | B/Panama/45/90                         | 1,0 TCID <sub>50</sub> /ml   | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Malaysia/2506/04                     | 0,025 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Florida/02/06                        | 0,025 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Brisbane/60/2008                     | 0,05 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Maryland/15/2016                     | 0,25 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Colorado/6/2017                      | 0,25 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Hawaii/01/2018                       | 8,0 TCID <sub>50</sub> /ml   | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Missouri/12/2018(NA D197E)           | 10 TCID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Washington/02/2019                   | 60 TCID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
| Influenza B, lignaggio Yamagata | B/Florida/07/2004                      | 0,50 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Florida/04/06                        | 0,25 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Wisconsin/01/2010                    | 0,50 CEID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Wisconsin/10/2016                    | 20 TCID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Indiana/17/2017                      | 10 TCID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
|                                 | B/Oklahoma/10/2018                     | 10 TCID <sub>50</sub> /ml    | NEG        | NEG         | POS         | NEG |
| RSV A                           | RSV-A/NY                               | 0,386 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | POS |
|                                 | RSV-A/WI-629.8.2/2007                  | 0,50 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | NEG         | POS |
|                                 | RSV-A/WI/629-11-1_2008                 | 0,50 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | NEG         | POS |
|                                 | RSV-A, ceppo: 4/2015 isolato n. 1      | 0,25 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | NEG         | POS |
| RSV B                           | RSV-B/WV14617/85                       | 0,10 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | NEG         | POS |
|                                 | RSV-B-CH93(18)-18-01                   | 0,10 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | NEG         | POS |

<sup>a</sup> Trascritti di RNA *in vitro*

<sup>b</sup> Il virus A/Indiana/02/2020 era privo di titolo e ai fini del test è stato diluito 100.000 volte in una matrice di sfondo simulata.

- c Uno dei tre replicati ha riportato ERRORE. La sessione è stata ripetuta con successo per ottenere tre replicati validi.
- d RNA virale purificato in matrice di sfondo simulata è stato usato per i virus dell'influenza aviaria A a causa delle norme di biosicurezza.
- e A causa delle norme di biosicurezza, i virus di influenza A aviaria (H7N9) inattivati privi di titolo virale sono stati diluiti 100.000 volte in matrice di sfondo simulata e analizzati.

## 18.4 Specificità analitica (esclusività)

Un'analisi *in silico* per possibili reazioni crociate con tutti gli organismi elencati nella Tabella 8 è stata eseguita mappando individualmente i primer e le sonde SARS-CoV-2 del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus con le sequenze scaricate dal database GISAID. I primer e le sonde E non sono specifici per SARS-CoV-2 e rileveranno il coronavirus SARS umano e dei pipistrelli. Non si prevede alcuna reattività crociata potenziale con altri microrganismi elencati nella Tabella 8, sulla base dell'analisi *in silico*.

**Tabella 8. Microrganismi analizzati nell'analisi *in silico* per il bersaglio SARS-CoV-2**

| Microrganismi della stessa famiglia genetica | Microrganismi ad alta priorità                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Coronavirus umano 229E                       | Adenovirus (es. C1 Ad. 71)                                |
| Coronavirus umano OC43                       | Metapneumovirus umano (hMPV)                              |
| Coronavirus umano HKU1                       | Virus parainfluenzali 1-4                                 |
| Coronavirus umano NL63                       | Influenza A                                               |
| Coronavirus SARS                             | Influenza B                                               |
| Coronavirus MERS                             | Influenza C                                               |
| Coronavirus dei pipistrelli                  | Enterovirus (es. EV68)                                    |
|                                              | Virus respiratorio sinciziale                             |
|                                              | Rhinovirus                                                |
|                                              | <i>Chlamydia pneumoniae</i>                               |
|                                              | <i>Haemophilus influenzae</i>                             |
|                                              | <i>Legionella pneumophila</i>                             |
|                                              | <i>Mycobacterium tuberculosis</i>                         |
|                                              | <i>Streptococcus pneumoniae</i>                           |
|                                              | <i>Streptococcus pyogenes</i>                             |
|                                              | <i>Bordetella pertussis</i>                               |
|                                              | <i>Mycoplasma pneumoniae</i>                              |
|                                              | <i>Pneumocystis jirovecii</i> (PJP)                       |
|                                              | <i>Parvovirus</i>                                         |
|                                              | <i>Candida albicans</i>                                   |
|                                              | <i>Corynebacterium diphtheriae</i>                        |
|                                              | <i>Legionella non-pneumophila</i>                         |
|                                              | <i>Bacillus anthracis</i> (antrace)                       |
|                                              | <i>Moraxella catarrhalis</i>                              |
|                                              | <i>Neisseria elongata</i> e <i>Neisseria meningitidis</i> |
|                                              | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                             |
|                                              | <i>Staphylococcus epidermidis</i>                         |

| Microrganismi della stessa famiglia genetica | Microrganismi ad alta priorità      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              | <i>Streptococcus salivarius</i>     |
|                                              | <i>Leptospira</i>                   |
|                                              | <i>Chlamydia psittaci</i>           |
|                                              | <i>Coxiella burnetii</i> (febbre Q) |
|                                              | <i>Staphylococcus aureus</i>        |

Oltre all'analisi *in silico* dei primer e delle sonde SARS-CoV-2 per determinare la reattività crociata, la specificità analitica del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus è stata valutata mediante test al banco di un pannello di 48 microrganismi comprendente 4 coronavirus umani, 1 coronavirus MERS e 43 patogeni respiratori comuni o potenzialmente presenti nel rinofaringe. Il pannello è stato analizzato in diversi pool di microrganismi; se un pool produceva un risultato positivo, si analizzava individualmente ogni componente del pool. Sono stati analizzati tre replicati di ciascun pool. Un campione veniva considerato negativo se lo erano tutti e tre i replicati. I ceppi batterici e di lievito sono stati analizzati in concentrazioni  $\geq 1 \times 10^6$  UFC/ml, eccettuando la *Chlamydia pneumoniae* che è stata analizzata a  $1,2 \times 10^6$  IFU/ml e il *Lactobacillus reuteri* che è stato analizzato a  $5 \times 10^7$  copie/ml di DNA genomico. I virus sono stati testati a concentrazioni  $\geq 1 \times 10^5$  TCID<sub>50</sub>/ml. La specificità analitica è stata del 100%. I risultati sono riportati nella Tabella 9.

**Tabella 9. Microrganismi delle vie respiratorie e coronavirus umano analizzati, concentrazioni e risultati del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus**

| Ceppo                       | Concentrazione analizzata     | SARS-CoV-2 | Influenza A | Influenza B | RSV |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-----|
| Controllo negativo          | NA                            | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Controllo positivo          | NA                            | POS        | POS         | POS         | POS |
| Coronavirus umano NL63      | 1.17e5 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Coronavirus MERS            | 1.17e5 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Coronavirus umano 229E      | 1.21e5 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Coronavirus umano OC43      | 1.02e5 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Coronavirus umano HKU1      | 1.23e6 copie/ml               | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Adenovirus tipo 1           | 4.07e5 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Adenovirus tipo 7           | 1.14e5 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Citomegalovirus             | 1.0e5 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Echovirus                   | 1.14e5 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Enterovirus                 | 2.80e5 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Virus di Epstein-Barr (EBV) | 5.60e6 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| HSV                         | 1.97e5 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Metapneumovirus umano       | 4.07e5 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Parainfluenza umana tipo 1  | 1.0e5 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Parainfluenza umana tipo 2  | 1.2e5 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Parainfluenza umana tipo 3  | 1.2e5 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Parainfluenza umana tipo 4  | 1.19e6 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Morbillo                    | 1.2e5 TCID <sub>50</sub> /ml  | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |

| Ceppo                                          | Concentrazione analizzata    | SARS-CoV-2 | Influenza A | Influenza B | RSV |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|-----|
| Virus della parotite                           | 1.2e5 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| Rinovirus tipo 1A                              | 1.0e5 TCID <sub>50</sub> /ml | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Acinetobacter baumannii</i>                 | 1,30e7 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Bordetella pertussis</i>                    | 6,40e7 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Burkholderia cepacia</i>                    | 1,90e8 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Candida albicans</i>                        | 6,30e6 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Candida parapsilosis</i>                    | 1,45e6 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Citrobacter freundii</i>                    | 1,73e8 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Corynebacterium sp.</i>                     | 1,27e7 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Enterococcus faecalis</i>                   | 5,87e7 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Escherichia coli</i>                        | 1,55e8 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Haemophilus influenzae</i>                  | 6,62e6 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Lactobacillus reuteri</i>                   | 5,0e7 copie/ml               | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Legionella spp.</i>                         | 1,42e8 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Moraxella catarrhalis</i>                   | 2,46e6 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i>                   | 2,7e6 UFC/ml                 | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Neisseria meningitidis</i>                  | 4,2e6 UFC/ml                 | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Neisseria mucosa</i>                        | 1,0e8 UFC/ml                 | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Propionibacterium acnes</i>                 | 8,25e7 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                  | 1,05e7 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Staphylococcus haemolyticus</i>             | 2,66e6 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Staphylococcus aureus</i>                   | 5,87e7 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i>              | 2,47e7 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Streptococcus agalactiae</i>                | 1,75e7 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i>                | 2,26e7 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Streptococcus pyogenes</i>                  | 9,0e6 UFC/ml                 | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Streptococcus salivarius</i>                | 4,19e6 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Streptococcus sanguinis</i>                 | 8,67e6 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Chlamydia pneumoniae</i>                    | 1,20e6 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |
| <i>Mycobacterium tuberculosis (avirulento)</i> | 1,20e6 UFC/ml                | NEG        | NEG         | NEG         | NEG |

## 18.5 Interferenza microbica

L'interferenza microbica del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus, causata dalla presenza di ceppi batterici o virali che si possono incontrare in campioni di analisi delle alte vie respiratorie umane, è stata valutata analizzando un pannello di 10 microrganismi commensali, costituito da 7 ceppi virali e 3 ceppi batterici. I campioni artificiali consistevano di virus SARS-CoV-2, influenza A, influenza B, RSV A o RSV B seminati a 3x il limite di rilevamento (LoD) in matrice simulata di tampone nasofaringeo (NPS)/tampone nasale (NS), in presenza di adenovirus tipo 1C, coronavirus umano OC43,

rinovirus tipo 1A, metapneumovirus umano, virus parainfluenzale umano tipi 1, 2 e 3 (ciascuno seminato a  $1 \times 10^5$  unità/ml), *Hemophilus influenzae* (seminato a  $1 \times 10^6$  CFU/ml), *Staphylococcus aureus* o *Staphylococcus epidermidis* (ciascuno seminato a  $1 \times 10^7$  CFU/ml).

Per ciascun virus bersaglio (SARS-CoV-2, Flu A, Flu B, RSV A o RSV B) sono stati analizzati replicati di 8 campioni positivi e ciascuna combinazione di ceppi microbici potenzialmente interferenti. Per ciascun bersaglio, tutti gli 8 campioni replicati sono stati correttamente identificati dal test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. Non è stata segnalata alcuna interferenza da parte di ceppi commensali virali o batterici.

## 18.6 Interferenze competitive

È stata valutata l'interferenza competitiva di Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus provocata da infezioni concomitanti, analizzando campioni artificiali di singoli ceppi di SARS-CoV-2, influenza A, influenza B o RSV a 3X LoD in presenza di diversi ceppi bersaglio in concentrazione maggiore, in una matrice di fondo simulata. La concentrazione a 3X LoD era di 414 copie/ml per SARS-CoV-2 (USA-WA1/2020 inattivato); 0,021 TCID<sub>50</sub>/ml per influenza A/Idaho/072018, 38,7 CEID<sub>50</sub>/ml per influenza B/Washington/2/2019; 0,99 TCID<sub>50</sub>/ml per RSV A/2/Australia/61 e 1,11 TCID<sub>50</sub>/ml per RSV B/9320/MA/77. I ceppi competitivi sono stati valutati come pari o superiori a  $10^4$  o più unità di misura del titolo (copie/ml, TCID<sub>50</sub>/ml, CEID<sub>50</sub>/ml o PFU/ml). La concentrazione corrispondente di RNA (copie/ml) per i ceppi di influenza e RSV è stata determinata mediante ddPCR (droplet digital PCR). Sono stati analizzati replicati di 3 per ciascun ceppo bersaglio e per ciascuna combinazione di ceppi competitivi. Il virus ad alta concentrazione non evidenzia alcun effetto inibitore competitivo se 3 di 3 replicati per del ceppo bersaglio riportano risultati positivi. Se i risultati riportavano meno di 3 replicati positivi su 3, la concentrazione del virus concorrente veniva ridotta in incrementi 10 volte maggiori finché non si osservava alcuna interferenza. Di seguito è riportata una sintesi dei risultati:

**Tabella 10. Sintesi dello studio sull'interferenza competitiva con influenza A ad alta concentrazione**

| Virus analizzati a 3X LoD | Virus interferente | Rilevazioni corrette (n/3) |                         |                         |                         |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                           |                    | a 1,7e8 copie di RNA/ml    | a 1,7e7 copie di RNA/ml | a 1,7e6 copie di RNA/ml | a 1,7e5 copie di RNA/ml |
| Influenza B               | Influenza A        | 0/3                        | 0/3                     | 2/3                     | 3/3                     |
| RSV A                     |                    | 0/3                        | 0/3                     | 3/3                     | Non analizzato          |
| RSV B                     |                    | 3/3                        | Non analizzato          | Non analizzato          | Non analizzato          |
| SARS-CoV-2                |                    | 3/3                        | Non analizzato          | Non analizzato          | Non analizzato          |

**Tabella 11. Sintesi dello studio di interferenza competitiva con influenza B ad alta concentrazione**

| Virus analizzati a 3X LoD | Virus interferente | Rilevazioni corrette (n/3) a 1,4e5 copie di RNA/ml |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Influenza A               | Influenza B        | 3/3                                                |
| RSV A                     |                    | 3/3                                                |
| RSV B                     |                    | 3/3                                                |
| SARS-CoV-2                |                    | 3/3                                                |

**Tabella 12. Sintesi dello studio di interferenza competitiva con RSV A ad alta concentrazione**

| Virus analizzati a 3X LoD | Virus interferente | Rilevazioni corrette (n/3) a 4,6e6 copie di RNA/ml |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Influenza A               | RSV A              | 3/3                                                |
| Influenza B               |                    | 3/3                                                |
| SARS-CoV-2                |                    | 3/3                                                |

Tabella 13. Sintesi dello studio di interferenza competitiva con RSV B ad alta concentrazione

| Virus analizzati a 3X LoD | Virus interferente | Rilevazioni corrette (n/3)<br>a 1,9e5 copie di RNA/ml |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Influenza A               | RSV B              | 3/3                                                   |
| Influenza B               |                    | 3/3                                                   |
| SARS-CoV-2                |                    | 3/3                                                   |

Tabella 14. Sintesi dello studio di interferenza competitiva con SARS-CoV-2 ad alta concentrazione

| Virus analizzati<br>a 3X LoD | Virus interferente | Rilevazioni corrette (n/3) |                       |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
|                              |                    | a 1e6 copie di RNA/ml      | a 1e5 copie di RNA/ml |
| Influenza A                  | SARS-CoV-2         | 3/3                        | Non analizzato        |
| Influenza B                  |                    | 1/3                        | 3/3                   |
| RSV A                        |                    | 3/3                        | Non analizzato        |
| RSV B                        |                    | 3/3                        | Non analizzato        |

Lo studio ha dimostrato che l'influenza A/Idaho/07/2018 a concentrazioni superiori a 1,7e5 copie di RNA/ml ha inibito il rilevamento dell'influenza B a 3X LoD, e a concentrazioni superiori a 1,7e6 copie di RNA/ml ha inibito il rilevamento di RSV A a 3X LoD (Tabella 10). Inoltre, il SARS-CoV-2 a concentrazioni superiori a 1e5 copie di RNA/ml ha inibito il rilevamento dell'influenza B a 3X LoD (Tabella 14). Nello studio non sono state osservate altre interferenze competitive per le potenziali infezioni concomitanti alle concentrazioni analizzate.

## 18.7 Sostanze potenzialmente interferenti

Le sostanze che potrebbero essere presenti nel tratto nasofaringeo (o introdotte durante la raccolta e la manipolazione dei campioni di analisi) e interferire potenzialmente con la rilevazione accurata di SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e RSV sono state valutate mediante analisi diretta con Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus.

Le sostanze potenzialmente interferenti nel tratto nasale e nasofaringeo possono includere, tra le altre: sangue, secrezioni nasali o muco e farmaci per naso e gola, utilizzati per alleviare congestione, secchezza nasale, irritazione o sintomi di asma e allergie, nonché antibiotici e antivirali. I campioni positivi e negativi sono stati preparati in una matrice simulata di tampone nasofaringeo (NPS)/tampone nasale (NS). I campioni negativi (N = 8) sono stati analizzati in presenza di ciascuna sostanza per determinare l'effetto sulle prestazioni del controllo per il trattamento dei campioni (SPC). I campioni positivi (N = 8) sono stati analizzati per ogni sostanza con i virus inoculati a 3X il LoD determinato per ciascun ceppo. I campioni risultati positivi a seguito di analisi con Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus includevano un ceppo di SARS-CoV-2, uno di influenza A H1N1, uno di influenza A H3N2, uno di influenza B e due di RSV (RSV A e RSV B). I controlli erano campioni con virus inoculati a 3X LoD in matrice NPS/NS simulata, priva di sostanze potenzialmente interferenti. Nella Tabella 15 sono elencate le sostanze valutate, con i relativi principi attivi.

Tabella 15. Sostanze potenzialmente interferenti analizzate

| ID sostanza                         | Sostanza/classe                   | Sostanza/principio attivo           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Salbutamolo solfato                 | Broncodilatatore beta-adrenergico | Salbutamolo solfato (5 mg/ml)       |
| Afrin                               | Spray nasale                      | Ossimetazolina, 0,05%               |
| Terreno di trasporto universale BD  | Terreni di trasporto              | Terreno di trasporto universale BD  |
| Copan 3U045N.PH (tampone Cepheid/M) | Terreni di trasporto              | Copan 3U045N.PH (tampone Cepheid/M) |
| Sangue                              | Sangue                            | Sangue (umano)                      |
| Fluticasone propionato spray nasale | Corticosteroide nasale            | Fluticasone propionato              |

| ID sostanza           | Sostanza/classe                                      | Sostanza/principio attivo                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Mentolo               | Pastiglie per la gola, anestetico orale e analgesico | Benzocaina, mentolo                                                          |
| Mucina                | Mucina                                               | Proteina mucina purificata (ghiandola sottomandibolare bovina o suina)       |
| Mupirocina            | Antibiotico, unguento nasale                         | Mupirocina (20 mg/g=2%)                                                      |
| PHNY                  | Gocce nasali                                         | Fenilefrina, 1%                                                              |
| Soluzione fisiologica | Spray nasale salino                                  | Cloruro di sodio (0,65%)                                                     |
| Remel M4RT            | Terreni di trasporto                                 | Remel M4RT                                                                   |
| Remel M5              | Terreni di trasporto                                 | Remel M5                                                                     |
| Tamiflu               | Farmaci antivirali                                   | Zanamivir                                                                    |
| Tobramicina           | Antibatterico, sistemico                             | Tobramicina                                                                  |
| Zicam                 | Gel nasale                                           | Luffa operculata, Galphimia glauca, Histaminum hydrochloricum, zolfo (0,05%) |
| Zinco                 | Integratore di zinco                                 | Gluconato di zinco                                                           |

I risultati dello studio (Tabella 16) mostrano che, nella maggior parte dei casi, 8 replicati su 8 hanno riportato risultati positivi per ciascuna combinazione di virus e sostanza analizzata e non sono state osservate interferenze. Inizialmente quando Zicam è stato analizzato al 15% p/v, è stata osservata un'interferenza nel rilevamento dell'influenza B e dell'RSV A. Tuttavia, quando Zicam è stato analizzato al 7,5% p/v, non è stata osservata alcuna interferenza.

**Tabella 16. Valori Ct medi per i bersagli di Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus analizzati in presenza di sostanze potenzialmente interferenti**

| Sostanza                                                 | Concentrazione analizzata | Numero di risultati corretti/numero di test effettuati |                            |                                      |                                  |                       |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                          |                           | SARS-CoV-2/ USA-WA-1                                   | Influenza A/ Idaho/07/2018 | Influenza A H3N2/ Hong Kong/ 45/2019 | Influenza B/ Washington /02/2019 | RSV A/2/ Australia/61 | RSV B/9320/ MA/77 |
| Matrice NPS/ NS simulata di controllo (nessuna sostanza) | 100% (v/v)                | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Afrin                                                    | 15% (v/v)                 | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Salbutamolo solfato                                      | 0,83 mg/ml                | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Terreno di trasporto universale BD                       | N/D                       | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Sangue                                                   | 2% (v/v)                  | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Tampone Copan M                                          | N/D                       | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Fluticasone propionato spray nasale                      | 5 µg/ml                   | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |

| Sostanza              | Concentrazione analizzata | Numero di risultati corretti/numero di test effettuati |                            |                                      |                                  |                       |                   |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                       |                           | SARS-CoV-2/ USA-WA-1                                   | Influenza A/ Idaho/07/2018 | Influenza A H3N2/ Hong Kong/ 45/2019 | Influenza B/ Washington /02/2019 | RSV A/2/ Australia/61 | RSV B/9320/ MA/77 |
| Mentolo               | 1,7 mg/ml                 | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Mucina                | 0,1% (p/v)                | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Mupirocina            | 10 mg/ml                  | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| PHNY                  | 15% (v/v)                 | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Remel M4RT            | N/D                       | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Remel M5              | N/D                       | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Soluzione fisiologica | 15% (v/v)                 | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Tamiflu               | 7,5 mg/ml                 | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Tobramicina           | 4 µg/ml                   | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |
| Zicam                 | 15% (p/v)                 | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 5/8 <sup>a</sup>                 | 7/8 <sup>b</sup>      | 8/8               |
| Zinco                 | 0,1 µg/ml                 | 8/8                                                    | 8/8                        | 8/8                                  | 8/8                              | 8/8                   | 8/8               |

- <sup>a</sup> Con Zicam al 15% (w/v), è stata osservata una differenza statisticamente significativa tra il Ct medio del controllo e il Ct medio del test. Il test è stato ripetuto con Zicam al 7,5% (w/v) e non è stata osservata alcuna differenza clinicamente significativa tra il Ct medio dell'influenza B del controllo e il Ct medio dell'influenza B del test.
- <sup>b</sup> Con Zicam al 15% (w/v), è stata osservata una differenza statisticamente significativa tra il Ct medio del controllo e quello del test. I test sono stati ripetuti con Zicam al 7,5% (w/v) e non è stata osservata alcuna differenza statisticamente significativa tra la Ct medio dell'RSV A del controllo e il Ct medio dell'RSV del test.

## 18.8 Contaminazione da carry-over

È stato condotto uno studio per valutare se la cartuccia monouso Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus isolata ermeticamente nel contenuto previene il carry-over del campione di analisi e dell'amplicone, analizzando un campione negativo immediatamente dopo aver analizzato un campione altamente positivo nello stesso modulo GeneXpert. Il campione negativo utilizzato in questo studio consisteva in una matrice NPS/NS simulata, mentre il campione positivo consisteva in concentrazioni elevate di virus influenzale B e virus SARS-CoV-2 (Flu B/Wisconsin/10/2016 a 1,0e6 TCID<sub>50</sub>/ml e SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 inattivato a 1e4 copie/ml) seminati in matrice NPS/NS negativa. Il campione negativo era stato analizzato in un modulo GeneXpert all'inizio dello studio. Dopo il test iniziale del campione negativo, il campione altamente positivo è stato trattato nello stesso modulo GeneXpert, seguito immediatamente da un altro campione negativo. Questa operazione è stata ripetuta per 20 volte nello stesso modulo e ne sono risultati 20 positivi e 21 negativi per il modulo. Lo studio è stato ripetuto utilizzando un secondo modulo GeneXpert per un totale di 40 campioni positivi e 42 negativi. Tutti i 40 campioni positivi sono stati correttamente refertati come **SARS-CoV-2 POSITIVO (SARS-CoV-2 POSITIVE); Flu A NEGATIVO (Flu A NEGATIVE); Flu B POSITIVO (Flu B POSITIVE); RSV NEGATIVO (RSV NEGATIVE)**. Tutti i 42 campioni negativi sono stati correttamente refertati come **SARS-CoV-2 NEGATIVO (SARS-CoV-2 NEGATIVE); Flu A NEGATIVO (Flu A NEGATIVE); Flu B NEGATIVO (Flu B NEGATIVE); RSV NEGATIVO (RSV NEGATIVE)** con il test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. In questo studio non è stata osservata alcuna contaminazione da carry-over del campione di analisi o dell'amplicone.

## 18.9 Riproducibilità

La riproducibilità del test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus è stata stabilita in tre centri utilizzando un pannello di 9 componenti comprendente un campione negativo, quattro campioni a bassa positività (~1,5x LoD) e quattro campioni a positività moderata (~3x LoD). Il campione negativo era costituito da una matrice simulata senza microrganismo bersaglio o RNA bersaglio. I campioni positivi erano campioni artificiali in matrice simulata utilizzando NATrol SARS-CoV-2 (ZeptoMetrix) inattivato, virus in coltura di Influenza A/Idaho/07/2018, Influenza B/Wisconsin/10/2016 e RSV B/Wash/18537/62.

Il test è stato condotto in sei (6) giorni, utilizzando tre (3) lotti di cartucce Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus presso tre (3) centri partecipanti, ciascuno con due (2) operatori, per produrre un totale di 144 osservazioni per componente del pannello (3 centri x 2 operatori x 3 lotti x 2 giorni/lotto x 2 sessioni x 2 replicati = 144 osservazioni/componente del pannello). I risultati dello studio sono riepilogati nella Tabella 17.

**Tabella 17. Riepilogo dei risultati di riproducibilità - Percentuale di concordanza**

| Campione                          | Centro 1      |               |               | Centro 2       |                |                | Centro 3      |                |                | % concordanza totale<br>[IC al 95%] |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
|                                   | Op 1          | Op 2          | Centro        | Op 1           | Op 2           | Centro         | Op 1          | Op 2           | Centro         |                                     |
| <b>Negativi</b>                   | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24 | 100%<br>48/48 | 100%<br>24/24  | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 100%<br>(144/144)<br>[97,4-100,0]   |
| <b>SARS-CoV-2<br/>Pos. bassa</b>  | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24 | 100%<br>48/48 | 100%<br>24/24  | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 100%<br>(144/144)<br>[97,4-100,0]   |
| <b>SARS-CoV-2<br/>Pos. moder</b>  | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24 | 100%<br>48/48 | 100%<br>24/24  | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 100%<br>(144/144)<br>[97,4-100,0]   |
| <b>Influenza A<br/>Pos. bassa</b> | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24 | 100%<br>48/48 | 100%<br>24/24  | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 100%<br>(144/144)<br>[97,4-100,0]   |
| <b>Influenza A<br/>Pos. moder</b> | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24 | 100%<br>48/48 | 100%<br>24/24  | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 100%<br>(144/144)<br>[97,4-100,0]   |
| <b>Influenza B<br/>Pos. bassa</b> | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24 | 100%<br>48/48 | 95,8%<br>23/24 | 95,8%<br>23/24 | 95,8%<br>46/48 | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 98,6%<br>(142/144)<br>[95,1-99,6]   |
| <b>Influenza B<br/>Pos. moder</b> | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24 | 100%<br>48/48 | 100%<br>24/24  | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 100%<br>23/23 | 95,8%<br>23/24 | 97,9%<br>46/47 | 99,3%<br>(142/143)<br>[96,1-99,9]   |
| <b>RSV<br/>Pos. bassa</b>         | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24 | 100%<br>48/48 | 95,8%<br>23/24 | 100%<br>24/24  | 97,9%<br>47/48 | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 99,3%<br>(143/144)<br>[96,2-99,9]   |
| <b>RSV<br/>Pos. moder</b>         | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24 | 100%<br>48/48 | 100%<br>24/24  | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 100%<br>24/24 | 100%<br>24/24  | 100%<br>48/48  | 100%<br>(144/144)<br>[97,4-100,0]   |

## 19 bibliografici

1. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>. Consultato il 9 febbraio 2020.
2. bioRxiv. (<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1>). Consultato il 3 marzo 2020.
3. Petric M, Comanor L, Petti CA. Role of the laboratory in diagnosis of influenza during seasonal epidemics and potential pandemics. *J Infect Dis*. 2006;194:S98-110.
4. Schweiger B, Zadow I, Heckler R, et al. Application of a fluorogenic PCR assay for typing and subtyping of influenza viruses in respiratory samples. *J Clin Micro*. 2000;38:1552-1558.
5. <https://www.cdc.gov/flu/about/viruses-types.html>. Consultato il 19 maggio 2016.
6. <http://www.cdc.gov/RSV/index.html>. Consultato il 14 marzo 2013.
7. Acero-Bedoya, S., Wozniak, P. S., Sánchez, P. J., Ramilo, O., & Mejias, A. (2019). Recent trends in RSV immunoprophylaxis: clinical implications for the infant. *American journal of perinatology*, 36(S 02), S63-S67.
8. Solomon, D. A., Sherman, A. C., & Kanjilal, S. (2020). Influenza in the COVID-19 Era. *Jama*, 324(13), 1342-1343.
9. Centers for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical laboratories (consultare l'ultima edizione). <https://www.cdc.gov/labs/bmbl/index.html>
10. Clinical and Laboratory Standards Institute. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline. Document M29 (fare riferimento all'ultima edizione).
11. REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006).
12. Occupational Safety and Health Standards, Hazard Communication, Toxic and Hazard Substances (March 26, 2012) (29 C.F.R., pt. 1910, subpt. Z).

## 20 Sede centrale Cepheid

### Sede globale

Cepheid  
904 Caribbean Drive  
Sunnyvale, CA 94089  
USA

Telefono: + 1 408 541 4191  
Fax: + 1 408 541 4192  
[www.cepheid.com](http://www.cepheid.com)

## 21 Assistenza tecnica

Prima di contattare il Supporto Tecnico di Cepheid, raccogliere le seguenti informazioni:

- Nome del prodotto
- Numero di lotto
- Numero di serie dello strumento
- Messaggi di errore (se presenti)
- Versione del software e, se pertinente, codice riportato sull'etichetta di servizio (Service Tag) del computer

### Supporto Tecnico negli Stati Uniti d'America

Telefono: + 1 888 838 3222 E-mail: [techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

### Supporto tecnico in Francia

Telefono: + 33 563 825 319 E-mail: [support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)

Le informazioni di contatto di tutti gli uffici di Supporto tecnico di Cepheid sono disponibili nel sito: [www.cepheid.com/en/support/contact-us](http://www.cepheid.com/en/support/contact-us).

## 22 Tabella dei simboli

| Simbolo                                                                             | Significato                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Numero di catalogo                             |
|    | Marchio CE - Conformità europea                |
|    | Dispositivo medico diagnostico <i>in vitro</i> |
|    | Non riutilizzare                               |
|    | Codice lotto                                   |
|    | Consultare le istruzioni per l'uso             |
|    | Avviso                                         |
|    | Produttore                                     |
|   | Paese di produzione                            |
|  | Contenuto sufficiente per <i>n</i> test        |
|  | Controllo                                      |
|  | Data di scadenza                               |
|  | Limiti di temperatura                          |
|  | Rischi biologici                               |
|  | Solo per uso su prescrizione                   |
|  | Mandatario nella Comunità Europea              |
|  | Mandatario in Svizzera                         |
|  | Importatore                                    |
|  | Paese di origine: Svezia                       |

| Simbolo                | Significato                             |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Country of Origin: USA | Paese di origine: Stati Uniti d'America |



Cepheid  
904 Caribbean Drive  
Sunnyvale, CA 94089  
USA

Telefono: + 1 408 541 4191

Fax: + 1 408 541 4192



Cepheid AB  
Röntgenvägen 5  
SE-171 54 Solna  
Sweden



Cepheid Switzerland GmbH  
Zürcherstrasse 66  
Postfach 124, Thalwil  
CH-8800  
Switzerland



Cepheid Switzerland GmbH  
Zürcherstrasse 66  
Postfach 124, Thalwil  
CH-8800  
Switzerland



## 23 Cronologia delle revisioni

Descrizione delle modifiche: 302-8401, da Rev. B a Rev. C

| Sezione | Descrizione della modifica                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6       | Chiarimento sull'origine animale dello stabilizzatore proteico utilizzato nel prodotto.                                                                                             |
| 15      | Chiarimento sui risultati INVALID (NON VALIDI) e dichiarazione di ripetizione dei test.                                                                                             |
| 16.1    | Chiarimento sui risultati INVALID (NON VALIDI). Aggiunta raccomandazione.                                                                                                           |
| 17      | Aggiunto un potenziale trigger per risultati INVALID (NON VALIDI).                                                                                                                  |
| 19      | Aggiornamento dei riferimenti bibliografici.                                                                                                                                        |
| 20      | Rimozione della sede centrale dell'UE.                                                                                                                                              |
| 22      | Aggiunta dei simboli del paese di origine. Aggiornamento dei simboli (secondo la norma EN ISO 15223-1:2021) e dell'indirizzo del Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea. |